

waterpik


**Waterpik®
Sensonic® Professional Plus
Toothbrush SR-3000**

**Brosse à dents
professionnelle plus
Sensonic® de Waterpik®
SR-3000**

**Cepillo dental
Waterpik® Sensonic®
Professional Plus SR-3000**

**Spazzolino
Waterpik® Sensonic®
Professional Plus SR-3000**

**Зубная щетка Waterpik®
Sensonic®
Professional Plus SR-3000**

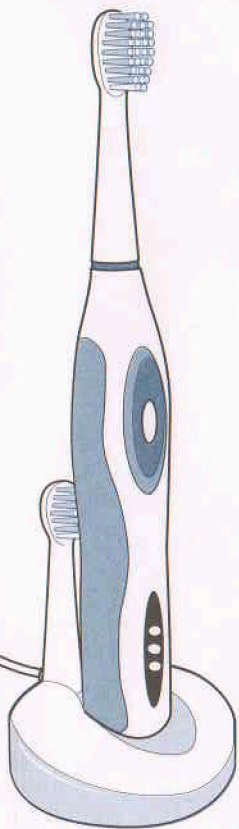

.....
www.waterpik.com


Зарядка зубной щетки Sensonic® Professional Plus

Перед первым использованием поставьте изделие заряжаться на 24 часа. В процессе зарядки батареек световой индикатор на ручке будет указывать уровень заряженности и при полной зарядке все три индикатора будут постоянно гореть. Полного заряда хватит на одну неделю обычного использования (чистка дважды в день по 2 минуты).



Световой индикатор зарядки

Когда изделие снято с подключенной к источнику питания базы, световой индикатор укажет степень зарядки и через десять секунд погаснет. После использования изделия световой индикатор будет показывать уровень зарядки в течение 10 секунд.

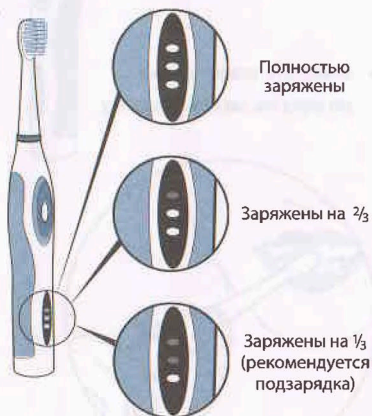


Полностью заряжены

Заряжены на $\frac{2}{3}$

Заряжены на $\frac{1}{3}$
(рекомендуется подзарядка)

Для полной перезарядки изделия в таком случае потребуется 24 часа. Если изделие должно храниться в течение долгого времени (полгода или больше), перед хранением поставьте его заряжаться в течение 24 часов. Никогда не оставляйте изделие на хранении надолго без полной зарядки.

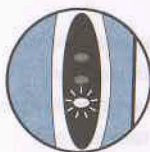

Если нижний светодиод начинает быстро мигать, изделие не будет работать.


Для того, чтобы зубная щетка снова начала работать, поместите ее на подзарядку примерно на час. Тем не менее, для достижения полного уровня зарядки потребуется 24 часа.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Акустическая чистка

- Вставьте насадку щетки в ручку изделия и твердо нажмите, чтобы она встала на место.


- Поместите головку щетки в рот перед тем, как включить щетку.

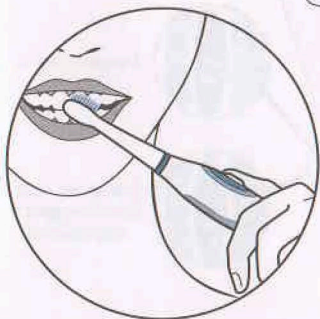

- Выберите низкую или высокую скорость чистки путем нажатия на кнопку после включения. Нажмите на кнопку один раз для установки низкой скорости и два раза – для установки высокой скорости




- Если подержать кнопку включения-выключения нажатой примерно в течение 1,5 секунд в положении низкой скорости, щетка отключится.
- Низкая скорость – для мягкой чистки и массажа десен.
- Высокая скорость – для лучшего удаления налета.
- Для получения наилучших результатов направьте щетку под углом 45 градусов к десне.

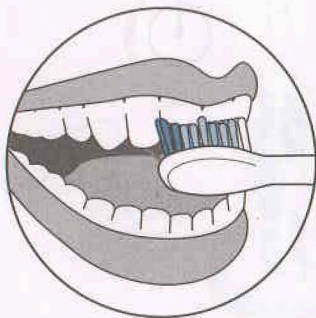

- Для оптимизации акустической чистки применяйте более слабое давление по сравнению с чисткой обычной зубной щеткой.

- Медленно перемещайте щетку по всей полости рта. Многие зубные врачи рекомендуют отводить 30 секунд на чистку каждой четверти полости.
- Таймер Quad Timer: Ваша щетка Sensonic® Professional Plus будет издавать короткий прерывистый звук, чтобы напомнить о необходимости переместить щетку на следующий участок.

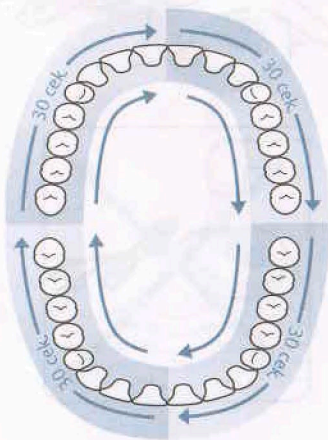

- Таймер на две минуты: Щетка автоматически отключится после истечения двух минут работы.




2 минуты

Правила пользования щеткой для чистки межзубных промежутков

- Вставьте насадку щетки в ручку изделия и твердо нажмите, чтобы она встала на место
- Поместите головку щетки в рот перед тем, как включить щетку.
- Щетку можно использовать как с зубной пастой, так и без нее.




- Расположите кончик насадки под углом в 90 градусов к линии десны между двумя зубами
- Включите ручку щетки и мягко водите ей в промежутках между зубами.

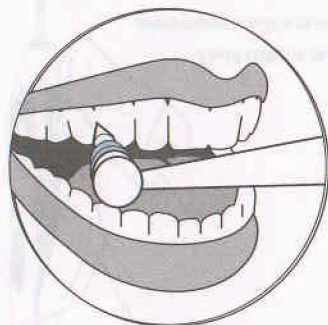


Чистка


1. После каждого использования выключите изделие, снимите головку щетки с ее ручки и сполосните головку в воде.

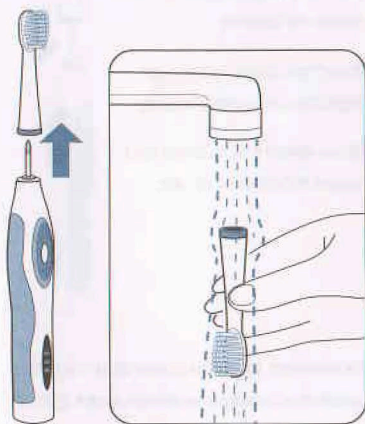

2. После каждого использования насухо вытрите ручку.

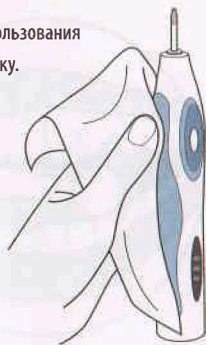

3. Периодически чистите базу для зарядного устройства мягкой влажной тканью, предварительно отключив изделие от сети.

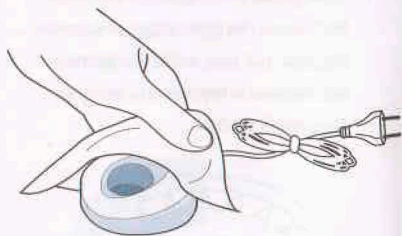

Колпачок для насадки-щетки

Колпачки для насадок-щеток подходят как к стандартным, так и к компактным моделям. Колпачок побольше подходит к стандартным насадкам, колпачок меньшего размера подходит к компактным насадкам.



Колпачок для компактной насадки-щетки

Колпачок для стандартной насадки-щетки



Насадка-щетка стандартная, колпачок большего размера

Обслуживание

Щетки Waterpik не имеют подлежащих сервисному обслуживанию электрических элементов и не требуют регулярного обслуживания.

к аксессуарам, обращайтесь с местному дистрибьютору, адрес которого можно найти на сайте www.waterpik.com/intl. Пожалуйста, не отправляйте изделие в компанию Waterpik International, Inc., поскольку это задержит сервисное обслуживание. В корреспонденции укажите серийный номер изделия и номер модели. Эти данные можно найти на нижней части вашего изделия.

Важные меры предосторожности

Зубная паста Argm & Hammer® PeroxiCare®, абразивные или химические чистящие средства могут повредить пластмассовый корпус изделия.

Утилизация

Данное изделие работает от перезаряжаемой никель-металлогидридной батарейки. Эти батарейки не подлежат замене.


Пожалуйста, не выбрасывайте данное изделие с бытовым мусором. Извлеките батарейки из изделия в соответствии с инструкцией на стр. 60 и сдайте изделие в утиль в местном пункте приема. Поступая таким образом, вы помогаете сохранить окружающую среду.

Адрес вашего местного дистрибьютора можно найти на сайте www.waterpik.com/intl.


Замена батареек **Примечание: Этот процесс не имеет обратного действия.**

Перезаряжаемая батарейка внутри зубной щетки не подлежит замене, но ее можно извлечь для утилизации. Извлекайте батарейку только после истечения ее срока годности. Если вы сделаете это раньше, изделие не будет больше работать. Разрядите батарейку: включайте щетку на двухминутные циклы тех пор, пока щетка не перестанет работать. Соблюдайте основные правила предосторожности. Когда срок годности изделия подойдет к концу, откройте ручку по инструкции, извлеките батарейки и сдайте их в утиль согласно местным правилам. Остальные элементы изделия могут быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

1. Воспользуйтесь монеткой или плоским металлическим предметом и поворачивайте крышку против часовой стрелки до тех пор, пока она не выступит вперед. После этого она уже не сможет вращаться.

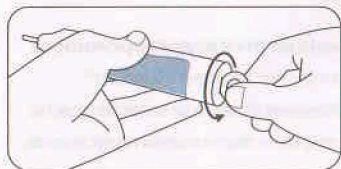


2. Установите стержень на жесткую поверхность и сильно надавите.

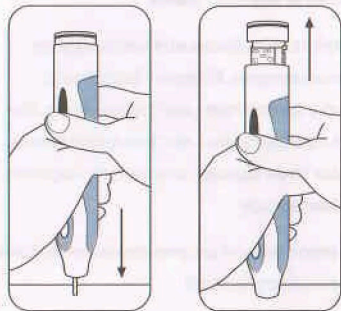

3. Снимите крышку и извлеките внутренние элементы. Отрежьте ленту и удалите ее.



4. Поднимите батарейки и по одному отрежьте электрические провода от платы.

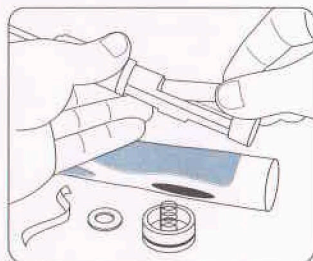

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ДВА ГОДА

Компания Water Pik, Inc. гарантирует первоначальному покупателю/владельцу данного нового изделия, что оно свободно от дефектов в материалах и в сборке в течение двух лет с даты покупки. Сохраните ваш кассовый чек для подтверждения даты покупки. Компания Water Pik, Inc. оставляет за собой право потребовать возврата изделия для анализа заявки и определения, подлежит ли изделие гарантийному обслуживанию. Мы заменим любую признанную нами дефективной часть изделия так, как посчитаем нужным, если изделие не было сломано покупателем, или не было использовано не по назначению, не было переделано или повреждено после покупки, и если оно использовалось по инструкции. Ремонт или замена изделия по данной гарантии будет произведена местным дистрибьютором, адрес которого можно найти на сайте [www.waterpik.com/intl]. Копия данной гарантии и адрес местного дистрибьютора может быть послана покупателю по его просьбе по электронной или по обычной почте. Данная ограниченная гарантия не покрывает аксессуары или расходные элементы, напр., насадки, головки щеток и т.п.

Данная гарантия предоставляет вам специфические юридические права. Мы также можете иметь другие права в соответствии с вашим местным законодательством.

Адрес вашего местного дистрибьютора можно найти на сайте www.waterpik.com/intl.

Звуковая зубная щетка Waterpik Sensonic Professional Plus (SR-3000E) имеет средний срок службы 4 года, срок службы зависит оттого, как зубная щетка используется.