

Техническое обслуживание и очистка

1. Если насадка не работает должным образом, немедленно нажмите на кнопку и проверьте верхнюю часть насадки. Если есть дефект, замените насадку на новую.
2. Если светодиодный индикатор не загорается в процессе зарядки, проверьте, хорошо ли подключена зарядная станция к источнику питания и сам аккумулятор.
3. Перед каждой процедурой очищайте и стерилизуйте насадки.
4. Оставшуюся гуттаперчу можно очистить с помощью медицинского ватного тампона.
5. При правильном использовании насадку можно стерилизовать более 25 раз, время стерилизации зависит от температуры (не менее 20 минут при температуре 121 °С, не менее 5 минут при температуре 132/134 °С).

Гарантия

Как производитель, мы берем на себя ответственность за дефект изделия, вызванный материалом и процессом производства, только если он все еще не вышел за рамки гарантийного срока (1 год).

Гарантия на основной блок данного оборудования составляет 1 год, на аккумулятор - 6 месяцев.









За любые повреждения, возникшие по вине неуполномоченных третьих лиц, мы не несем никакой ответственности!

4

Технические характеристики

1. Размер наконечника: Длина: 126 мм; Ширина: 19 мм
2. Напряжение питания: 230 В/50 ГГц или 115 В/60 ГГц
3. Температура
Эксплуатация: от 0 °С до +40 °С
Хранение: от -10 °С до +60 °С
4. Влажность
Эксплуатация: ≤ 95 % относительной влажности
Хранение: ≤ 95 % относительной влажности
5. Атмосферное давление
Эксплуатация: 70-106 кПа
Хранение: 50-106 кПа
6. Защита от поражения электрическим током: тип В

Символы и расшифровка


-  Оборудование класса II (адаптер)
-  Постоянный ток
-  Оборудование типа В
-  Внимание! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством
-  Только для использования в помещении
-  Продукт с маркировкой CE
-  Директива по отходам WEEE
-  Пожалуйста, обратитесь к инструкциям

5

Аппарат для обрезания гуттаперчи Gutter Cutter



Руководство по эксплуатации

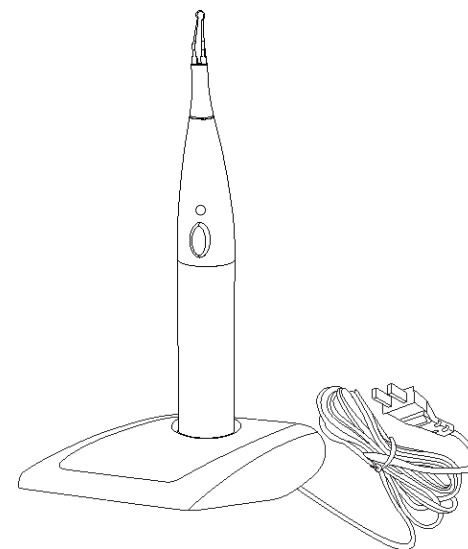

Меры предосторожности



Внимание: перед использованием данного оборудования внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, это способствует правильной работе с ним.

1. Данное оборудование должно использоваться в соответствии с указаниями руководства, за любые действия или цели, выходящие за рамки указаний и требований, производитель ответственности не несет.
2. При использовании источника питания, пожалуйста, убедитесь, что напряжение соответствует требованиям оборудования, в противном случае это может нанести вред пользователю или пациенту.
3. Во избежание риска получения травмы не допускайте прикосновения наконечника прибора к губам, деснам или слизистым оболочкам пациента. Обязательно наличие коффердама!
4. Опасность возгорания: не допускается контакт наконечника ручки с легковоспламеняющимся газом или жидкостью.
5. Не допускается использование данного оборудования в среде, заполненной легковоспламеняющимся газом.
6. Не погружайте устройство и зарядку в жидкость.
7. Если из устройства вытекает жидкость (возможно, из аккумулятора), прекратите работу и отправьте устройство в официальный сервисный центр для замены аккумулятора. Опасно использовать данное оборудование при протекании аккумулятора.
8. Не допускается замена аккумулятора, иначе это может привести к проблемам или сбоям в работе.
9. Оборудование следует использовать с осторожностью при работе с пациентами с сердечными заболеваниями, беременными женщинами и детьми.
10. Данное оборудование предназначено только для профессионального использования.

1

Стандартная конфигурация

| | |
|-------------------------------------|---|
| Наконечник для обрезания гуттаперчи | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Насадки для наконечника (4 шт.) | 1 |

Предназначение

Данный продукт может использоваться только квалифицированными стоматологами и зуботехническими лабораториями для проведения операций по пломбированию корневых каналов, используется для обрезания лишней гуттаперчи из корневого канала.

Инструкции

Перед зарядкой проверьте, соответствует ли напряжение источника питания оборудованию.

Зарядка

1. Сначала подключите зарядное устройство к источнику питания.
2. Поместите устройство в зарядную станцию, когда устройство окажется в гнезде для зарядки, включится световой индикатор на наконечнике.

Аккумулятор

1. При первом использовании оборудования убедитесь, что оно полностью заряжено, этот процесс занимает около 12 часов.
2. Пожалуйста, ставьте на зарядку никель-металлгидридный аккумулятор до его полной разрядки. Это обеспечивает наилучший срок службы оборудования, в зависимости от частоты использования срок службы составляет около 2 лет.

2

Функционирование во время работы

1. Установите насадку на наконечник, изогнутая часть сверху находится напротив кнопки, что облегчает работу.
2. Насадки следует устанавливать на наконечник в охлажденном состоянии (при этом кнопка не должна быть нажата во время установки), используйте изогнутую часть насадки для разрезания гуттаперчи.
3. Перед началом работы убедитесь, что насадка надежно установлена. Очистка: Насадка легко очищается после нагревания в течение нескольких секунд.
4. Когда гуттаперча срезана, отпустите кнопку, подождите, пока насадка остынет, прежде чем вынимать ее из рта пациента. Кнопка управления – это «контактная кнопка», после отпускания кнопки прибор прекратит работу.

Меры предосторожности

1. Пока насадка все еще находится на наконечнике, не сгибайте ее.
2. Если во время обработки на насадку оказывается слишком сильное давление, это может негативно сказаться на сроке службы насадки.
3. Следует избегать воздействия электромагнитного излучения.
4. Не вносите никаких изменений в устройство.

3