



Perio-Mate

Perio-Mate

Наконечник для удаления биопленки

Perio-Mate используется для работы в периодонтальных карманах и при перимплантите. При проведении процедур по очистке внутри периодонтальных карманов ключевым моментом является исключение повреждения мягких тканей и поверхности корня зуба. Ультратонкий водяной спрей в сочетании с порошком на основе глицерина «Perio-Mate Powder» аккуратно удаляет биопленку в периодонтальных карманах всего за 20 секунд.

Благодаря многолетнему опыту изучения динамики потока жидкостей для создания турбинных наконечников, компания NSK разработала безопасную и высокоэффективную технологию генерации спрея, позволяющую быстро и точно удалить налёт биопленки из поддесневых областей. Сочетание тонкого наконечника Perio-Mate с тонкой и пластичной насадкой делает процедуры безопаснее и эффективнее, а также обеспечивает оптимальный обзор области операции. Форма и материал насадки делают её удобной в использовании и способствуют полному и легкому доступу к мягким тканям для наиболее комфортного лечения.

Преимущества

- Инновационная насадка от NSK • Точная и безупречная подача порошка
- Уход • Кольцо регулировки мощности • Тонкий дизайн носика наконечника
- Плавное вращение на 360°

<https://stomshop.pro>



Perio-Mate

Наконечник для удаления биопленки

Инновационная насадка от NSK



Новый дизайн насадки от NSK основывается на использовании сочетания полупрозрачных материалов, способствующих лучшему обзору во время проведения процедур. Одноразовые гигиенические насадки удобны в эксплуатации и безопасны.

Гибкая пластиковая насадка удобна в использовании и безопасна для зубодесневых карманов



Тонкая насадка имеет правильную степень жесткости для плавного перемещения по поверхности зуба и легко проникает в тесные зубодесневые карманы и в корневую зону смежных зубов, не причиняя дискомфорта пациенту. Оперативный и быстрый контроль направления насадки при помощи кончиков пальцев позволяет поддерживать правильное положение насадки и обеспечивает всегда оптимальный угол подачи спрея.

Совершенная форма наконечника, основанная на исследовании динамики жидкости, обеспечивает безупречную подачу порошка в зубодесневой карман




Многолетний опыт по созданию турбинных наконечников и тщательный анализ динамики потока жидкости позволил компании NSK досконально изучить и понять, какие манипуляции должен совершать врач в ограниченном пространстве зубодесневого кармана. В итоге мы добились идеального потока спрея с порошком, точного удаления поддесневого налёта и биопленки и минимального повреждения мягких тканей.

Преимущества использования тонкого наконечника в узких участках ротовой полости

Даже в труднодоступных участках ротовой полости тонкий наконечник Perio-Mate позволяет охватить максимально широкую рабочую зону, гарантируя прекрасный обзор и упрощая выполнение поддесневых процедур.

Длинная узкая форма наконечника создана для простого доступа к областям, требующим локализации наконечника под определенным углом, например, в зоне между молярами.

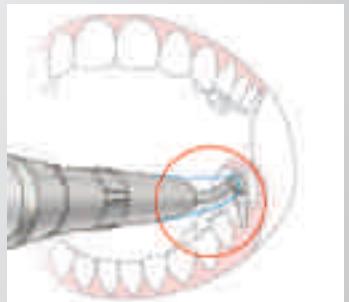



Плавное вращение на 360 градусов для безопасной и точной обработки



Даже при выполнении сложных операций наконечник легко повернуть движением пальцев. Насадка легко проникает в труднодоступные места, не нанося вред соседним зубам и контурам.

Кольцо регулировки потока порошка



Удобное в использовании кольцо регулировки подачи порошка позволяет быстрым движением пальца точно настроить скорость потока порошка. Вы можете аккуратно и эффективно удалить биопленку и проводить лечение периимплантитных карманах и вокруг имплантов. Более того, простой контроль и возможность остановки потока порошка позволяют удалять биопленку в зоне лечения, не отрываясь от процедуры.



<https://stomshop.pro>

Комплект системы Perio-Mate

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА		
PER-PTL-P	Y1002654		Под переходник NSK
PER-KV-P	Y1002655		Под переходник KaVo® LED
PER-SR-P	Y1002656		Под переходник Sirona® LED
PER-WH-P	Y1002657		Под переходник W&H® Roto Quick
PER-BA-P	Y1002658		Под переходник Bien-Air® Unifix®
PER-M4-P	Y1002659		Подсоединение напрямую к разъему MIDWEST
PER-B2-P	Y1002660		Подсоединение напрямую к разъему BORDEN

Комплектация

- Наконечник • Резервуар для порошка • Насадка (40 шт.) • Набор для обслуживания

Насадка Perio-Mate

Гигиенические одноразовые насадки



модель Perio-Mate Nozzle Tip

код заказа Y1002741

- 40 шт. в упаковке

Порошок Perio-Mate

Порошок для поддесневых операций
для использования с пескоструйными
системами



■ На основе глицина

■ Средний размер гранул <45 мкм

модель Perio-Mate Powder

код заказа Y900938

- 4 бутылки, упакованные в коробку

- Каждая бутылка содержит 100 гр порошка

Клиническая процедура

- Для удаления биопленки в зубодесневом кармане одного зуба при идеальных условиях необходимо примерно 20 секунд (по 5 секунд на каждую сторону) на совершение процедуры.
- Применяется для лечения периимплантита в пределах глубины 5 мм в области воспаленной десны. (Для использования системы при периодонтите и периимплантите после начального этапа лечения необходимо провести терапевтическое лечение; только для периодонтальных карманов с глубиной не более 5 мм).


*Не мойте резервуар для порошка
или крышку для резервуара в
термодезинфекторе.



Наконечник можно
промывать в
термодезинфекторе

135°C
Автоклавирование
при температуре
до 135°C

Уход

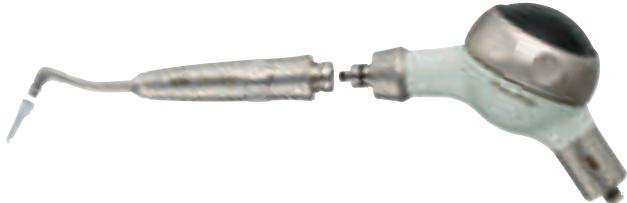

Для чистки и дезинфекции вы можете легко отсоединить наконечник, насадку и резервуар для порошка.
Набор для ухода включает в себя насадку для продувки, легко удаляющую закупорку инструмента.

<https://stomshop.pro>