

Светопроницаемый, сильный,
интеллектуальный.



 **ceramil zolid**



AMANNGIRRBACH

Монолит - цирконий с «защитной» функцией

Бескопромиссные эстетика и надёжность. ЭТО цифровое системное решение для монокристаллического зубного протеза из циркония

МАТЕРИАЛ

ceramill zolid



Новоразработанный, полупрозрачный оксид циркония с улучшенной микроструктурой. Спекание при температуре 1450 °С, щадящее материал – это его долгосрочная стабильность.

ceramill stain & glaze



Глазурь и красители оксида циркония для эстетически завершенного монокристаллического зубного протеза.

СПОСОБ

ЦФП «Цифровое функциональное протезирование»



Стратегия дизайна и методика изготовления функционально безотказного зубного протеза при помощи Ceramill CAD/CAM - системы.

МОНОЛИТ - ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ceramill zolid


ЭСТЕТИЧНЫЙ - ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ - БЕЗОТКАЗНЫЙ

ФУНКЦИЯ

ceramill artex®



Воспроизведение динамических окклюзионных контактов при помощи Ceramill Artex® предотвращает преждевременные контакты, что особенно важно для монокристаллических реставраций.

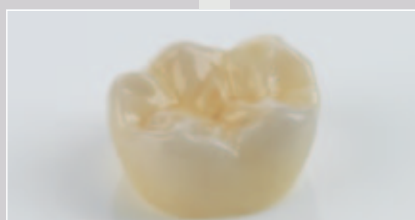

- Особо экономично в собственной лаборатории изготовить полностью анатомические протезы из оксида циркония
- Облицовка не требуется, нет риска откола облицовки и простое изготовление
- Динамическое оформление окклюзии предотвращает пришлифовывание

© Uwe Klingner, Klingner Zahntechnik

ОБРАЗЕЦ


ceramill mindforms




Зубы из цифровой библиотеки по Кнуту Миллеру – это высокоценная, эстетически-функциональная основа и одновременно «ускоритель» для создания полностью анатомических коронок и каркасов из оксида циркония.

Монолит-цирконий, высокостабильный и не требует облицовки

Долгосрочно стабильный, не требует облицовки и эстетически превосходно подходит для цельнокерамических коронок и мостовидных протезов из оксида циркония. Таково самое простое описание нового, улучшенного по своим свойствам материала – полупрозрачного оксида циркония от AmannGirrbach. Этот новоразработанный оксид циркония позволяет достичь с температурами спекания, щадящими материал, желательные полупрозрачные результаты. Благодаря соблюдению температуры спекания 1450°C, которая соответствует продукту и особенностям материала, предотвращается чрезмерный рост зерна, чем гарантируется продолжительная стабильность готовых работ.

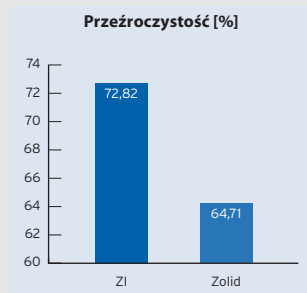

Ceramill zolid и Ceramill Zi в сравнении (Источник: исследования, проведённые фирмой)

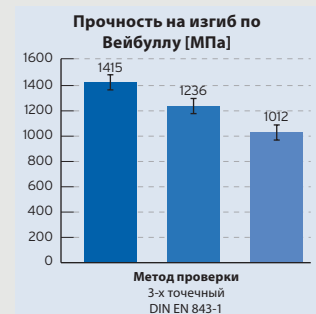

Ceramill Zolid имеет прочность на изгиб до 1500 МПа (Источник: исследования, проведённые фирмой)

Просто, быстро и функционально




ceramill stain & glaze



Красители и глазурь от AMANNGIRRBACH разработаны таким образом, что за один рабочий шаг возможно провести обжиг краски и глазури.

ceramill polish - lab kit

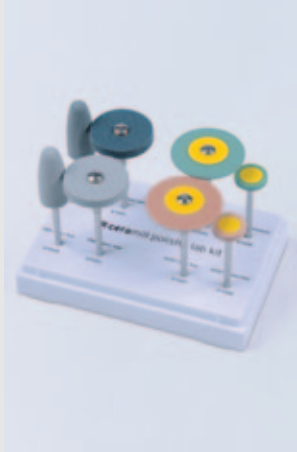

Набор для обработки и предварительной полировки реставраций в лаборатории.

ceramill polish - dent kit



Набор для придания особого блеска полировки работ после их шлифования в кабинете.



Ceramill Zolid Starterkit

760013 Ceramill Zolid стартовый набор (для Ceramill Motion)

Объём поставки: Ceramill Zolid 71 S, Ceramill Polish – Dent Kit, Ceramill Polish – Lab Kit, Ceramill Stain & Glaze Kit, Ceramill Ligid кисточки (размеры 1 + 3, по 1 штуке), Ceramill Ligid CL OR, Ceramill Ligid CL GR, Ceramill Ligid ёмкости для красителя (10 штук), Ceramill Zolid форма для спекания штабелируемая (1 штука), Ceramill Therm шарики для спекания 200 грамм, Ceramill Roto Motion 0,6 (1 штука), Ceramill Zolid инструкция по использованию

Ceramill Stain & Glaze Kit (набор красителей)

760350 Ceramill Stain & Glaze Kit, состоит из 12-ти компонентов

Объём поставки: Ceramill Stain yellow, 760352 Ceramill Stain orange, 76053 Ceramill Stain blue, 760354 Ceramill Stain grey, 760355 Ceramill Stain white, 760356 Ceramill Stain A, 760357 Ceramill Stain B, 760358 Ceramill Stain C, 760359 Ceramill Stain D, 760360 Ceramill Glaze, 760361 Ceramill Stain & Glaze Working Ligid 25 миллилитров, 760362 Ceramill Stain & Glaze Reflow Ligid 8 миллилитров

Ceramill Polish - Dent Kit

875509 Ceramill Polish - Dent Kit
Оксид циркония - полировочный набор для
врача-стоматолога

Объём поставки: Cup medium, Disk medium, Cup fein, Disk fein (по 1 штуке)

Ceramill Polish - Lab Kit

875500 Ceramill Polish - Lab Kit
Оксид циркония - полировочный набор для зубного техника

Объём поставки: PRE-Wheel medium, PRE-Cone medium, PRE-Wheel fine, PRE-Cone fine, POST-Disc medium, POST-Wheel medium, POST-Disc fine, Post Wheel fine (по 1 штуке)

Ceramill Ligid растворы красителей

760470 Ceramill Ligid полный набор
4 красителя по 100 мл., 4 ёмкости для красителей, 1 пинцет

Объём поставки: 760471 Ceramill Ligid CL1, 100 мл., включая ёмкость для красителя; 760472 Ceramill Ligid CL2 100 мл., включая ёмкость для красителя; 760473 Ceramill Ligid CL3 100 мл., включая ёмкость для красителя; 760474 Ceramill Ligid CL4 100 мл., включая ёмкость для красителя; Ceramill Ligid кисточки (размеры 1 + 3, по 1 штуке)

760476	Ceramill Ligid CL OR оранжевый 100 мл., включая ёмкость для красителя	
760477	Ceramill Ligid CL GR серый 100 мл., включая ёмкость для красителя	
760478	Ceramill Ligid кисточка, размер 1	4 штуки
760479	Ceramill Ligid кисточка, размер 3	4 штуки
760450	Ceramill Ligid ёмкости для красителей	10 штуки

Ceramill Zolid заготовки

(также пригодны для копировального фрезерования)

760162	Ceramill Zolid 71 XS	в = 12mm	1 штука
760163	Ceramill Zolid 71 S	в = 14mm	1 штука
760164	Ceramill Zolid 71	в = 16mm	1 штука
760165	Ceramill Zolid 71 M	в = 18mm	1 штука
760166	Ceramill Zolid 71 L	в = 20mm	1 штука

Ceramill Zolid принадлежности

760606	Ceramill Roto Motion 0,6 - Фрезер с магнитным креплением Ø 0,6 мм. (для воссоздания анатомической формы)
178370	Ceramill Zolid Форма для спекания штабелируемая, для спекания Ceramill Zolid
178311	Ceramill Therm Шарики для спекания, 200 грамм
760998	Инструкция по применению (MP4 диски)
920150	Tabletop – Рабочее руководство по Книту Миллеру о формах зубов



AMANNGIRRBACH