

# DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS

VIENNA, MONACO LUX, MONACO S LUX,  
DENSIM QUICK LED, DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX,  
DUBLIN P 1:1, DENSIM HEAD, DENSIM OIL



A black and white photograph of a dental handpiece. The handpiece is positioned in the lower-left corner, angled towards the center. It is emitting a dense, wide spray of fine particles, likely metal shavings or dust, which fills the right and upper portions of the frame. The background is solid black, making the bright spray and the metallic handpiece stand out. The overall composition is dynamic and emphasizes precision and power.

# Сила и Точность

**DENSIM** DENTAL INSTRUMENTS

## **СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ**

Сила и точность стоматологических инструментов DENSIM позволяют достичь совершенных результатов в вашей работе.

### **Кнопочная система**

Комфортная и безопасная кнопочная система фиксации и извлечения ротационных инструментов.

### **Керамические подшипники**

Фирменные керамические подшипники DENSIM гарантируют длительный срок службы ротора, снижают уровень шума и вибрации.

### **Освещение**

Монолитный световод обеспечивает идеальное и равномерное освещение всего рабочего поля.

### **Зажимной механизм**


Длительный срок службы зажимного механизма ротационных инструментов обеспечивается благодаря цапге из прочного материала - карбида вольфрама.

### **Гигиена**

Поверхность всех наконечников дезинфицируется химическими дезинфекционными средствами (дезинфекция с помощью аэрозоля или дезинфицирующих салфеток).

## ТУРБИНЫ

# VIENNA

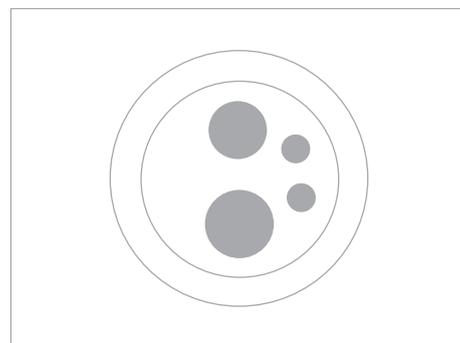

### Эффективность работы

Система трехточечного охлаждения, низкий уровень вибраций и минимальный уровень шума помогают повысить комфорт и эффективность работы стоматолога.

### 4-канальное подключение

Турбины DENSIM можно подключить с помощью стандартного 4-канального соединения типа Midwest.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. обороты (при 2,8 бар)

Рекомендованное давление воздуха

Подшипники

Освещение

Мощность

Тип головки

Номер позиции

### VIENNA

320.000 об/мин.

2,1 - 2,8 бар

керамические

без подсветки

18 Ватт

стандартный

DSHC2022

Эргономическая форма инструментов и простой но эффективный дизайн удовлетворяют требованиям каждого стоматолога. Линейка турбин VIENNA обеспечивает оптимальные параметры по приемлемой цене. Благодаря зажимному механизму с цангой из прочного металла обеспечивается длительный срок службы изделия. Практичная кнопочная система позволяет быстро и безопасно осуществлять замену ротационного инструмента. Качество инструментов дополняет хромирование поверхности. При использовании керамических подшипников достигается низкий уровень шума турбины.

# MONACO



## MONACO S LUX

Модификация с небольшой головкой подходит для работы в труднодоступных местах в области моляров и для детских врачей.



## DENSIM QUICK LED

Составной частью турбин MONACO является коннектор DENSIM QUICK LED, который оснащен антиретракционным клапаном. Он легко подключается к кабелю через соединение Midwest с помощью входящего в комплект ключа.

Номер позиции: DSQC6016K

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов (при 2,8 бар)

Давление приводного воздуха

Подшипники

Освещение

Мощность

Тип головки

Номер позиции (с коннектором)

Номер позиции (без коннектора)

### MONACO LUX

320.000 об/мин.

2,1 - 2,8 бар

керамические

LED

18 Ватт

стандартный

DSHC7031KSET

DSHC7031K

### MONACO S LUX

400.000 об/мин.

2,1 - 2,8 бар

керамические

LED

16 Ватт

мини

DSHC7032KSET

DSHC7032K

Турбины MONACO LUX оснащены подсветкой LED, которая находится в легко подключаемом коннекторе. Цветовая температура LED соответствует дневному свету. Срок службы DENSIM LED в несколько раз больше чем у традиционных галогенных лампочек. Монолитный стеклянный световод обеспечивает естественное освещение рабочего пространства. В предложении имеются модели MONACO LUX со стандартной головкой и MONACO S LUX с небольшой головкой. Изделия DENSIM можно стерилизовать в автоклаве при температуре до 135°C.

## УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

# DUBLIN U 1:1



### DUBLIN U 1:1

Угловой наконечник со съемной головкой, без подсветки, с передаточным соотношением 1:1.



### DUBLIN U 1:1 LUX

Угловой наконечник со съемной головкой, с подсветкой, с передаточным соотношением 1:1. Стекланный световод обеспечивает постоянное качество и интенсивность света.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов
Передаточное соотношение
Тип
Совместимость
Тип охлаждения
Ротационный инструмент
Номер позиции

#### DUBLIN U 1:1

40.000 об/мин.
1:1
угловой наконечник без подсветки
ISO 3964
внутреннее
тип RA ø 2,35 мм
DSLS2031SET

#### DUBLIN U 1:1 Lux

40.000 об/мин.
1:1
угловой наконечник с подсветкой
ISO 3964
внутреннее
тип RA ø 2,35 мм
DSLS2031LSET

Продуманный дизайн, простота использования и надежность – это свойства, характерные для наконечников DENSIM. Удобная форма инструментов и используемые производственные технологии позволяют достигать необходимой точности при работе стоматолога. Наконечники DENSIM полностью совместимы с микродвигателями, которые удовлетворяют норме ISO 3964. Преимуществом угловых наконечников DUBLIN U является съемная головка. Наконечники типа DUBLIN имеют поверхностную обработку в виде матового хрома. В предложении имеются модификации углового наконечника DUBLIN с подсветкой и без подсветки.

# DUBLIN P 1:1



## DUBLIN P 1:1

Прямой наконечник без подсветки, с поворотной зажимной системой, с передаточным соотношением 1:1.



## DENSIM HEAD

Съемная головка DENSIM HEAD с кнопочным зажимом ротационного инструмента. Головку можно стерилизовать в автоклаве до 135°C. Она подходит для угловых наконечников DUBLIN.

Номер позиции: DSLCH11

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов

Передаточное соотношение

Тип

Совместимость

Тип охлаждения

Ротационный инструмент

Номер позиции

### DUBLIN P 1:1

40.000 об/мин.

1:1

прямой наконечник без подсветки

ISO 3964

внутреннее

тип HP  $\varnothing$  2,35 мм

DSLS1031

Во всех наконечниках типа DUBLIN используется система внутреннего охлаждения. Охлаждающая вода и воздух подаются по двум независимым путям. Быструю замену ротационного инструмента обеспечивает практичный зажимной механизм. Поверхностная обработка гарантирует идеальную гигиену во время работы врача, а также и при очистке инструмента.

# DENSIM OIL



## Смазочный аэрозоль

Для правильного функционирования и длительного срока службы инструментов необходимо регулярно применять смазочное средство DENSIM OIL, которое используется для всех турбин, прямых, угловых наконечников и головок. Аксессуары для ухода и смазочные адаптеры изделий DENSIM OIL являются составной частью фирменной упаковки изделия.



© All rights reserved, print 8/2014

2014/RU

**DENSIM by**  
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.  
Vrbovská cesta 17  
921 01 Piešťany  
Slovak republic

T 00421 33 79 54 111  
F 00421 33 77 26 326

info@densim.com  
[www.densim.com](http://www.densim.com)