

# Dr's Light

## 1 Характеристики Dr's Light



### Двойная длина волны LED

Может полимеризировать любой тип материала (пик 405 & 460 нм).



### Широкая область воздействия

Возможность полимеризовать область 11 см в диаметре.



### Различные режимы полимеризации

Повышенной мощности, Турбо, Нормальный, Слабый, Мягкий старт, Пульсирующий.



### Регулируемый угол

Меняется в зависимости от нужной формы.



### Сфокусированный свет

Встроенная линза, улучшающая фокусировку светового потока.



### Большая емкость батареи

Батарея Samsung используется в течение длительного времени.



### Авто вкл/выкл

Для включения и выключения устройства.



### Поворот головки на 280°

Позволяет проникать в самые труднодоступные места ротовой полости.



### Цветной экран OLED



### Мягкие линзы

Легко заменяются и очищаются.



### Тонкая головка (15мм)

Легко достает до любой точки ротовой полости.



### Различные дополнительные насадки

Кариес-детектор, трансиллюминатор, отбеливание.





### Режим таймера

Устройство может быть использовано как таймер.

## 2 Программные режимы

Доступно шесть полимеризационных программ.

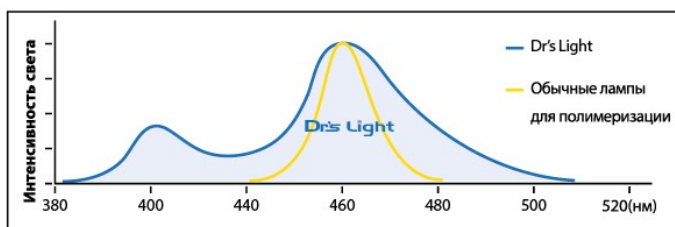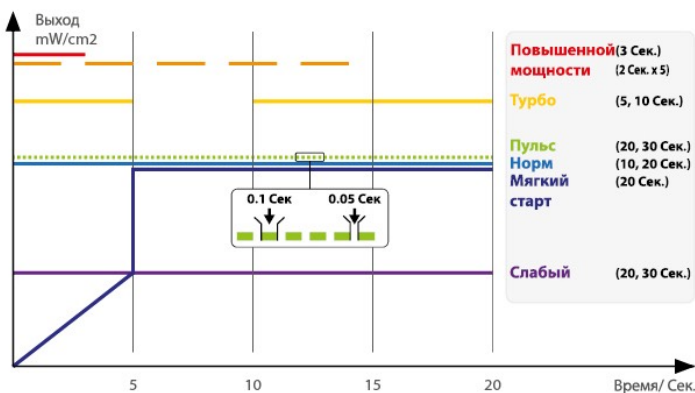

## 3 Различные головки [дополнительно]



### Насадка Кариес-детектор

позволяет распознать кариозные очаги, которые флуоресцируют красным цветом.



### Насадка Трансиллюминатор

позволяет обнаружить проксимальный кариес и трещины в зубах.



### Насадка Отбеливание

применяется для отбеливания зубов с использованием отбеливающего геля и фиксации брекетов.

## 4 WA набор [дополнительно]



## 5 Характеристики

Наконечник	Мощность	3.7V
	Макс.длина волны	405 нм & 460 нм
	Габариты	273 x 45 x 39 мм
	Вес	114 г.
Зарядное устройство	Мощность	5V
	Габариты	169 x 148 x 89 мм
	Вес	70 г.
Батарея	Тип	Литий - ионная батарея
	Напряжение	DC 3.7V
	Габариты	80 x 27 x 30 мм
	Вес	56 г.
Одноразовые чехлы	Количество	100 шт
	Материал	Полиэтилен
Адаптер	Входное напряжение	AC 100 ~ 240 V
	Выходное напряжение	DC 5V 2A