


СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

# МАТРАСЫ

И АКСЕССУАРЫ

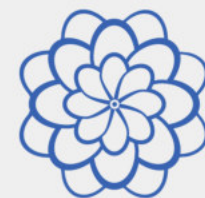

МЕДТЕКС.РФ



<https://stomshop.pro>



**03**

**ВСТУПЛЕНИЕ**

**04**


**МЕМОРИФОАМ**

**06**

**ТЕКСТИЛЬ**

**08**

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

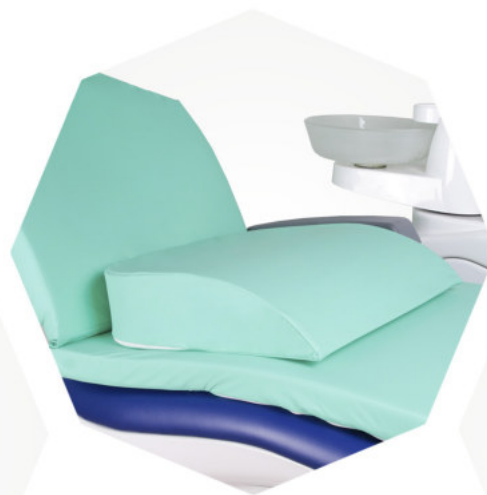

**10**

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
МАТРАСЫ**

**18**

**ПОДГОЛОВНИКИ**

**22**

**АКСЕССУАРЫ**

**25**

**ЦВЕТА**




**PHTHALATE  
FREE**





**TEXTILES  
VERTRAUEN**  
Schadstoffgeprüfte Textilien  
nach Öko-Tex Standard 100

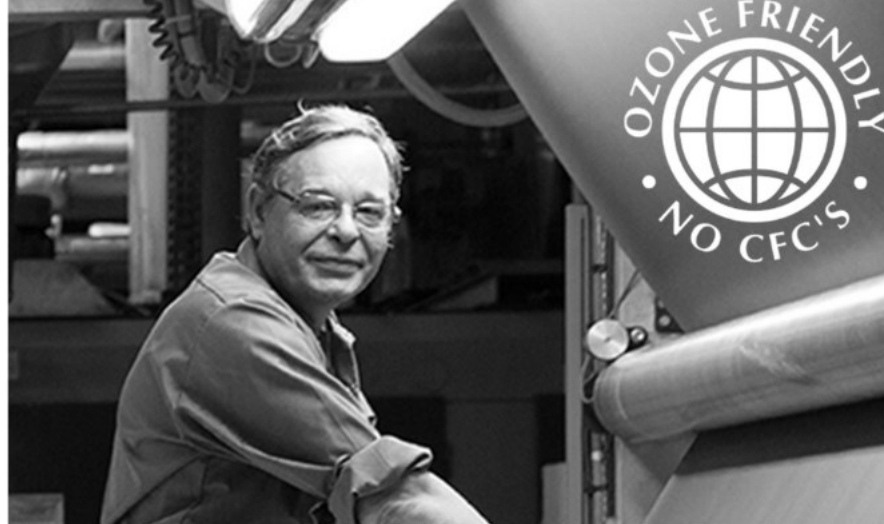

Когда мы находились у самых истоков разработки и производства стоматологических матрасов в России - топперы считались необязательным атрибутом. Шли годы, мы продолжали совершенствовать продукт и оттачивать наше мастерство.

На сегодняшний день матрас на установке это естественно и привычно. В превосходном качестве стоматологических матрасов от МЕДТЕКС.РФ успели убедиться сотни тысяч людей.

Наши топперы подойдут всем, кто ценит высокий уровень продукции и стремится вместе с нами быть лучшими в своем деле!

# НАПОЛНИТЕЛЬ МЕМОРИФОАМ



Модифицированный пенополиуретан (поролон) объединяет в себе два основных свойства - **вязкость** и **эластичность**, поэтому относится к классу вязкоупругих материалов.

## **Вязкость**

За счет вязкости материал принимает форму тела и не оказывает встречного давления, пытаясь восстановить свое первоначальное состояние.

## **Эластичность**


Способность восстановления после прекращения надавливания.

Эти два свойства позволяют называть материал - материалом с памятью формы.



Ячеистая, микропористая структура реагирует на температуру и вес человека. Материал равномерно распределяет давление, становясь более мягким в точках, где нагрузка выше, и не меняет своего состояния там, где нагрузка полностью отсутствует.

Данная особенность материала меморифоам дает пациенту возможность подолгу пребывать в спокойном положении, так как не оказывается точечного встречного давления.

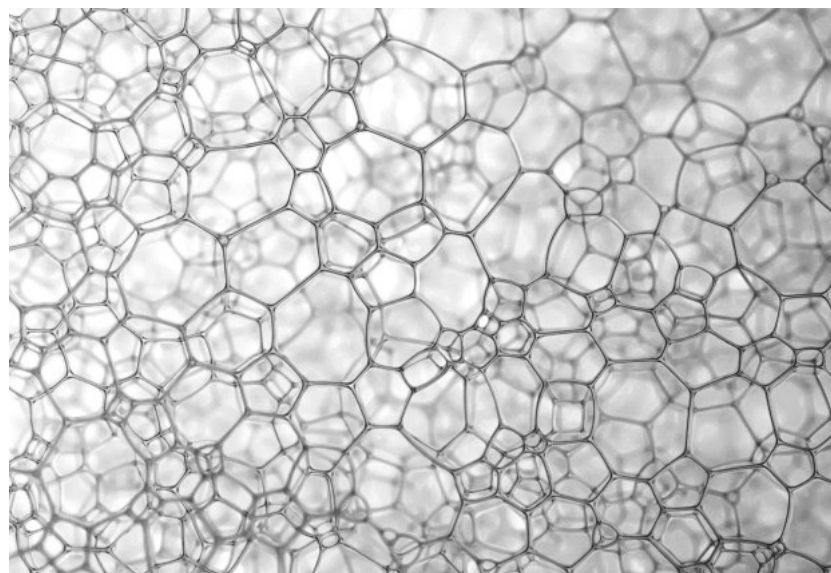

Эти ощущения можно сравнить только с пребыванием в кресле, которое сделали именно под Вас, учитывая все физиологические особенности.




# МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

## Водонепроницаемый

Для того, чтобы стоматологический матрас служил долго - чехол должен надежно защищать меморифоам от различного вида загрязнений и жидкостей. Поэтому в производстве мы используем профессиональный текстиль от бельгийской фабрики Plastibert (Пластиберт), который разработан специально для медицинских учреждений и активно используется не только в Европе, но и в России.

## Дополнительная защита

В качестве дополнительной защиты в состав текстиля включена активная антибактериальная обработка на основе триклозана - Ultra Fresh.

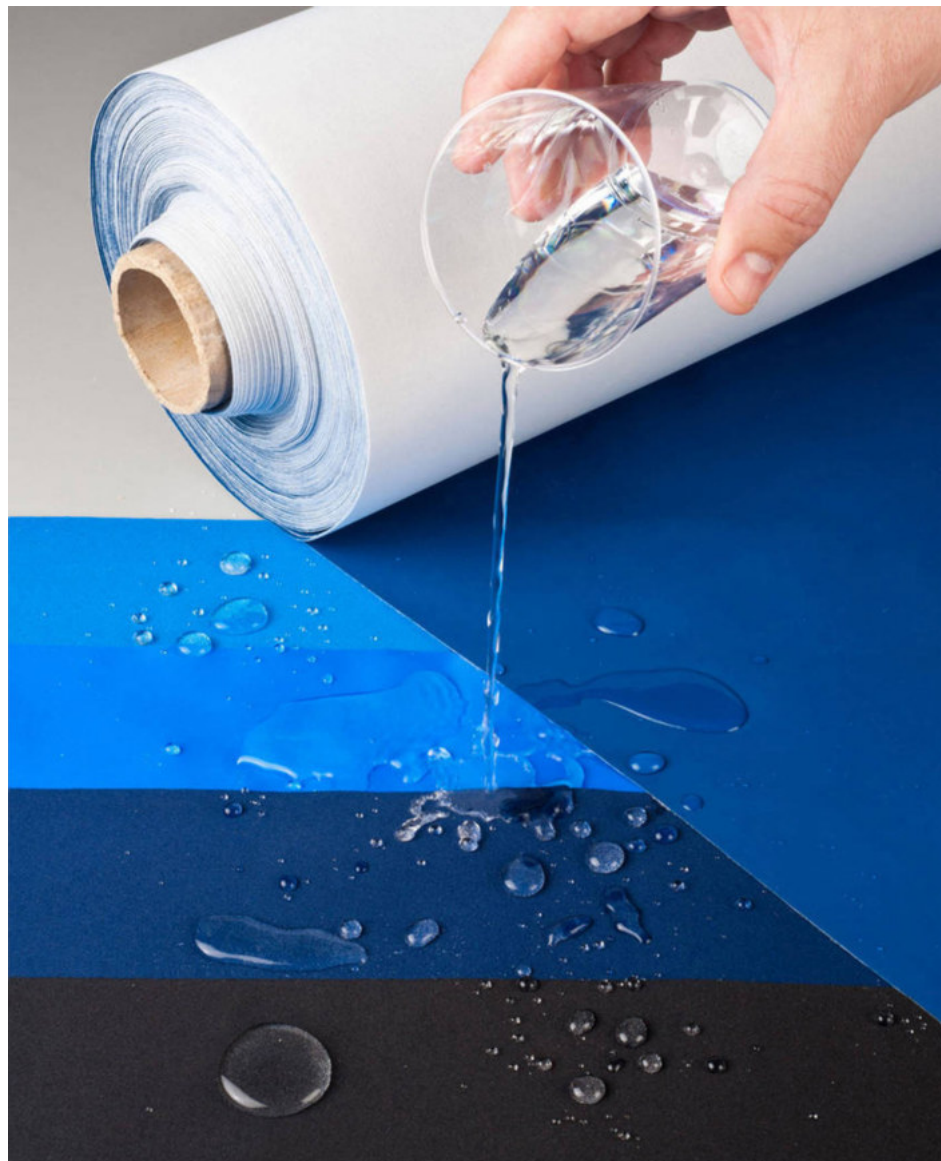



## Дышащий

Меморифоам пропускает воздух, и для того, чтобы не потерять это свойство, материал наружного покрытия также должен быть “дышащим”. Поэтому в наших чехлах мы используем только медицинское полиуретановое покрытие.

В отличие от материалов, в состав которых входит ПВХ, полиуретан хорошо пропускает воздух, что благоприятно сказывается на сроке службы наполнителя и эксплуатационных характеристиках в целом. За счет микровентиляции и терморегуляции лежать на таком матрасе намного комфортнее.

## Легкий в уходе

Материал чехла достаточно обработать мыльным раствором или специальными дезинфицирующими средствами. При сильных загрязнениях ткань выдерживает стирку до 95 °С и автоклав до 130 °С.



## Би-эластичный


Чтобы меморифоам принимал форму тела и правильно распределял нагрузку, чехол должен быть эластичным в обоих направлениях. Водонепроницаемый медицинский текстиль, в том числе, используется для производства противопролежневых матрасов, поэтому Вы можете не сомневаться - Вашим пациентам будет удобно!

## Безопасный

Материал чехла относится к классу не поддерживающих горение, что подтверждается сертификатом Crib 7. Он также безопасен для человека и окружающей среды, что подтверждается сертификатом Oeko - TEX standart 100 class 1.



# КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

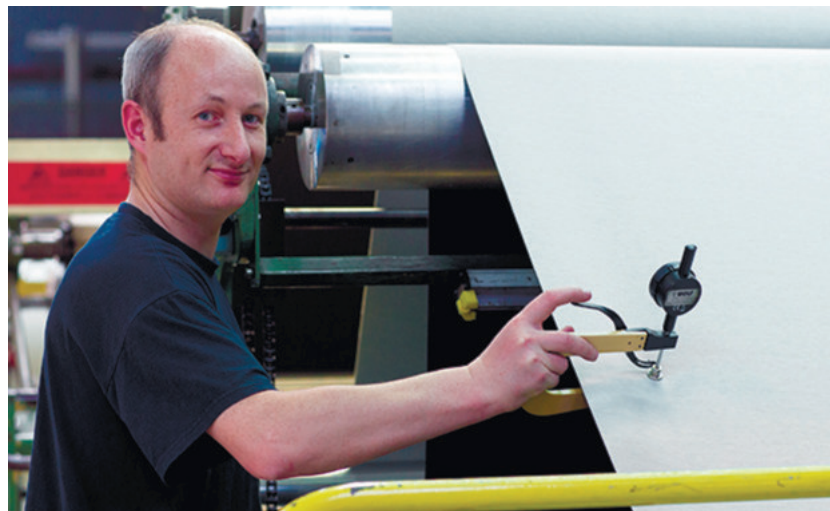


Контроль качества на всех этапах производства.



Толщина меморифоам в наших матрасах 5 см, за счет чего достигается ортопедическая поддержка.

Во всей продукции используется японская фурнитура от YKK.

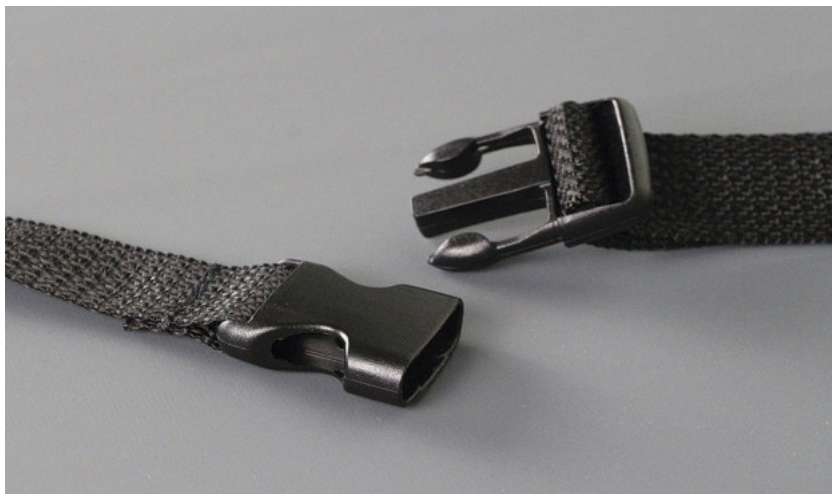

Фастексы обеспечивают быструю фиксацию на установке.



Сертификат соответствия подтверждает качество продукции.



Двойная прострочка борта в Топперах М2 и М3 подчеркивает высокое качество продукции.



Спинка: 50\*52 см.  
Сиденье: 105\*50 см.  
Толщина: 5 см.

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОППЕР M2

Выразительный,  
функциональный и  
продвинутый Топпер M2  
обеспечит высочайший  
уровень комфорта и защитит  
стоматологическое кресло.



<https://stomshop.pro>



Спинка: 45\*57 см.  
Сиденье: 105\*45 см.  
Толщина: 5 см.

# СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОППЕР М3

Правильные контуры и качественная детализация полностью повторяют форму стоматологической установки KaVo Estetica E30.



<https://stomshop.pro>



Спинка: 50\*50 см.  
Сиденье: 90\*50 см.  
Толщина: 5 см.



# ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТОППЕР М1

Отличный внешний вид и большой размер - это все про стоматологический матрас Топпер М1.



<https://stomshop.pro>



Спинка: 50\*45 см.  
Сиденье: 80\*45 см.  
Толщина: 5 см.

# ЛАКОНИЧНЫЙ ТОППЕР СТАНДАРТ

Прямые линии в дизайне и оптимальный размер делают Топпер Стандарт самой доступной моделью в линейке стоматологических матрасов МЕДТЕКС.РФ.



# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДГОЛОВНИК 122

За счет своих размеров  
Подголовник 122  
обеспечивает должным  
комфортом пациентов  
любой комплекции.



Ширина: 20 см.  
Длина: 24 см.  
Высота: 9 см.

# ПРАКТИЧНЫЙ ПОДГОЛОВНИК 12

Подголовник 12 снимает нагрузку на затылочную область, снижает дискомфорт в шейном отделе.



Ширина: 20 см.  
Длина: 20 см.  
Высота: 10 см.

<https://stomshop.pro>

# ПЛОСКИЙ ПОДГОЛОВНИК 8

Подголовник 8 относится к базовым и подходит в тех случаях, когда использование других подголовников избыточно.



Ширина: 22 см.  
Длина: 20 см.  
Высота: 5 см.

# ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДГОЛОВНИК 20

Подголовник 20 обеспечивает повышенную поддержку шейного отдела, снимая напряжение и болевые ощущения при длительных процедурах.



Ширина: 20 см.  
Длина: 30 см.  
Высота: 15 см.

<https://stomshop.pro>

# КОМФОРТНЫЙ ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК

Поясничный валик помогает разгрузить поясничный отдел во время длительных процедур.



Ширина: 23 см.  
Длина: 45 см.  
Высота: 11 см.



# ПОДУШКА БУСТЕР

Бустер будет незаменимым аксессуаром если Вы работаете с детьми. С помощью него, голова ребенка будет находиться на правильной высоте.



Ширина: 40 см.  
Длина: 43 см.  
Высота: 10 см.

<https://stomshop.pro>

# ДЫШАЩИЙ ФАРТУК

Защита пациента от  
различных загрязнений.



Ширина: 70 см.  
Длина: 100 см.

# ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 2021



Коричневый (47330)



Красный (22992)



Синий (6702)



Темно-серый (57151)



Апельсиновый (21869)



Сливовый (65125)



Черничный (69865)



Зеленый (73073)



Фиолетовый (65763)




Черный (110)



Светло-серый (5030)



Белый (800)

A man in a dark suit stands with his back to the camera on a rooftop terrace. He is looking out over a city skyline with numerous skyscrapers under a hazy, sunset sky. The scene is framed by a large window or glass railing.

**Бесплатно по России**

**8 (800) 300-68-20**

**Москва**

**+7 (495) 627-68-20**

**Санкт-Петербург**

**+7 (812) 627-68-20**

**Новосибирск**

**+7 (383) 312-68-20**

Информация, касающаяся описаний, комплектаций и технических характеристик продукции, их стандартного и дополнительного оснащения, приведена по состоянию на май 2021 года. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. Типографская печать не всегда в состоянии точно воспроизвести цвета материалов. Продукция на изображениях может быть показана с дополнительным оснащением, поставляемым за отдельную плату. Производитель не несёт ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте. Производитель не гарантирует доступность всех показанных и описанных вариантов продукции. Самая актуальная информация на сайте МЕДТЕКС.РФ.

© ООО «МЕД-ТЕКС»

Перепечатка или иное воспроизведение данного каталога допускается только с письменного разрешения правообладателя.

<https://stomshop.pro>