
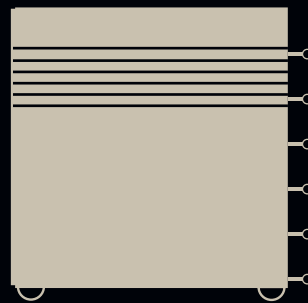


Smile

с легким прикосновением . . .

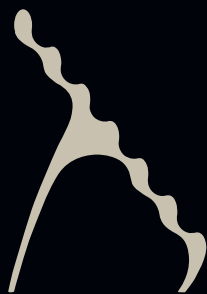

Smile Line 
made in switzerland

Архитектура в большей степени образ мышления чем профессия

Ле Карбюзье – архитектор, специалист по планированию городов и художник, родился в 1887 году в La Chaux-de-Fonds (Швейцария)

Ле Карбюзье без сомнения имеет право говорить об архитектуре. Чтобы он сказал, если бы его жизнь привела его в область дентальной техники? Может быть что-то вроде «Дентальная техника – это образ мышления, а не профессия».

Стиль работы на фирме Smile Line очень похож на стиль работы архитектора. Разработка нового продукта, от появления идеи до готового изделия очень сложна, все начинается с изучения самой вероятности создания продукта, затем следуют наброски, дизайн в 3D, изготовление прототипа, тесты на срок службы, производство инструментов и контроль на каждом этапе до изготовления продукта и монтажа. Это в большей степени серьезный вызов, а не поездка на отдых на пляж! Для людей, которые вовлечены в разработку, недели не заканчиваются в пятницу после обеда, мозг работает дальше, без усталости. Личная убежденность, энтузиазм и ответственность техников в большинстве случаев превращает в утопию возможность закончить работу и выключить свет в лаборатории в 17.00.

Все это было бы невозможно без важного дополнения: страсти. Безошибочная страсть, направленная на то, чтобы превратить гениальную идею в результат. Эта страсть ведет объект к большей функциональной отдаче - к эмоции.

Наша самая большая мечта: наша продукция облегчает повседневную работу за счет ее существенных свойств, ее эргономики и ее эксклюзивности и позволяет вам познать, что вы уникальны!

Оливье Шерен
Smile Line CEO

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Smile Lite	4-5
Определение цвета, фотография	Smile Capture	6-7
	Коллекция N.era	8-9
	N.era bRRRush	10-11
	[Njoy] N.era	12-13
Кисточки, аксессуары	H ₂ O	14-15
	Инструменты Smile Line	16-19
	Наборы инструментов	20-22
	Отвертки для имплантатов	23-25
Инструменты	Микровибратор	26-27
	U-mid Classic, U-mid EVO3	28-29
Палитры для обработки керамики	Wet'n'Dry EVO3, Wet'n'Dry Classic	30-33
	Tinto	34-35
	Моя расцветка для керамики	36-37
Умные принадлежности	Пробы керамики	38
	Flexipalette	39
	Compo Cubo	40-41
	Organ.ez	42-43
	Firing tray	44
	Zir.care	45
	«Паук» для пайки	46
	The Cube	47
	Золотое сечение	48-49
	New Architect Anterior	50-51
Восковые формы, воска	New Architect Posterior	52-53
	Восковые промежуточные элементы	54-55
	Прецизионные воска	56
	Гель временной фиксации на модели	57
ПИЛОТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	Ян Кех, Тун	58

SMILE LITE

ПРОСТО ЗАХВАТЫВАЕТ ДЫХАНИЕ!

Оптимальный и стандартизированный контакт благодаря Smile Lite, эффективнейшему инструменту для определения цвета и оперативного наблюдения за зубами.

Оснащенный светодиодами, которые калиброваны на «дневной свет - 5500°K», устройство постоянно обеспечивает стабильные условия для понимания цветов зубов. Smile Lite зарекомендовал себя как эффективное коммуникационное средство и приобрел важное значение в работе зубных врачей, клинического персонала и зубных техников.

Благодаря интегрированным магнитам – легко устанавливаемый и снимаемый поляризованный фильтр. Линзы Style Lense являются самым важным и революционным компонентом Smile Lite. Он обеспечивает совершенно новый и уникальный способ рассмотрения зубов. Рефлексия света устраняется для получения максимального результата – намного легче распознается структура зуба, как дентин, элементы индивидуальных характеристик и другие детали

Большая помощь: поляризованный фильтр обеспечивает лучшее понимание тона и показателей цвета зубов!

Другая интересная информация на сайте www.smilelite.ch





4

5



Наименование	Кат.номер
Комплект Smile Lite, вкл. линзы Style Lense- поляризационный фильтр, адаптер USB-A-мини USB	6500
Style Lense- поляризационный фильтр	6510

SMILE CAPTURE

ДЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ СТАНОВИТСЯ ДЕТСКОЙ ИГРОЙ

Немедленная передача снимков, обмен информацией через социальные сети... для большинства из нас сегодня это стало привычкой. Без сомнения это важный аргумент для оптимальной коммуникации между врачом и лабораторией.

Набор принадлежностей Smile Capture обеспечивает вам соединение вашего Smile Lite с вашим смартфоном: ежедневно производить профессиональные и высококачественные снимки и видео – просто и с эффектом обучения.

Smile Capture позволяет делать снимки с поляризационным фильтром и без него. Концепция включает бокс для калибровки, набор калибровочных карт и адаптеры для соединения смартфона со Smile Lite. Очень важно приложение App (бесплатное скачивание на AppStore или PlayStore), которое было разработано как полноценная составная часть Smile Capture.

Когда стартовало производство, поддержкой пользовались более новые поколения iPhone (4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus), в настоящее время, после новой разработки смартфонов Samsung, незамедлительно стала доступной версия Android.



Другая интересная информация на сайте www.smilelite.ch



Наименование	Кат. номер
Комплект Smile Capture, вкл.калибровочные карты (набор из 8 карт), универсальный адаптер SmartConnect 4-4S, SmartConnect 5-5S, App для iPhone или Android	6550-N
Универсальный адаптер SmartConnect	6560
Адаптер SmartConnect iPhone 4-4S	6551-4
Адаптер SmartConnect iPhone 5-5S	6551-5
Калибровочные карты «А», высокий и низкий показатель (2 шт.)	6552-A
Калибровочные карты «В», высокий и низкий показатель (2 шт.)	6552-B
Калибровочные карты «С», высокий и низкий показатель (2 шт.)	6552-C
Калибровочные карты «D», высокий и низкий показатель (2 шт.)	6552-D
Ассортимент калибровочных карт, высокий и низкий показатель (8 шт.)	6552N-Asst

6

7

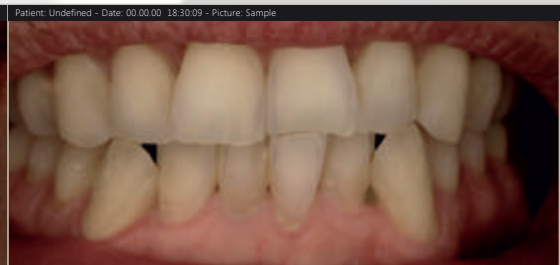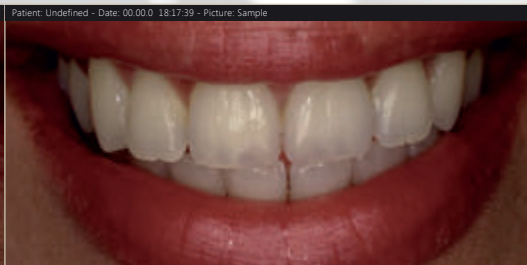

КИСТОЧКИ N.ERA

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КИСТОЧЕК ДЛЯ КЕРАМИКИ: ИННОВАЦИОННОЕ И ЭКСКЛЮЗИВНОЕ

N.era может означать «nera» (по-итальянски черный – цвет обжимного кольца) или «новая эра». Кисточки для керамики N.era фирмы Smile Line изготовлены из искусственных волокон новой эры – эксклюзивных и не использовавшихся до сих пор в дентальной промышленности. Речь идет о полиамидных волокнах, которые приобретают свои исключительные свойства только путем различной дополнительной химической обработки.

Их свойства – способность пружинить, водопоглощение, стабильная точность, а также долговечность – делают эти волокна нового типа превосходным инструментом, они равнозначны или лучше чем волоски Колински самого высокого качества.

Наши пилотные лаборатории и пользователи исключительно позитивно отзываются о применении кисточек и в восторге от инновационной идеи как основы N.era. Кисточки N.era обеспечивают больше комфорта в работе и новые возможности с точки зрения прецизионности при облицовке керамикой.

Линия N.era представлена как набор из четырех кисточек различных размеров, разумеется, вы можете заказать каждую из кисточек предпочитаемого вами размера как отдельный инструмент. Кроме того, запасные головки совместимы со всеми ручками линии инструментов Smile Line.



N.era №8-Macchiato (кисточка в комплекте): кат. номер 4200-8
Запасные головки №8: кат. номер 4201-8



8

9

N.era №6- Cappuccino (кисточка в комплекте): кат. номер 4200-6
Запасные головки №6: кат. номер 4201-6



N.era №4 - Moka (кисточка в комплекте): кат. номер 4200-4
Запасные головки №4: кат. номер 4201-4



N.era №1- Ristretto (кисточка в комплекте): кат. номер 4200-1
Запасные головки №1: кат. номер 4201-1



Наименование	Кат. номер
Набор кисточек N.era: 8- Macchiato, 6- Cappuccino, 4- Moka, 1- Ristretto.	4200-Asst
Алюминиевая ручка Macchiato.	4000-AH-MAC
Алюминиевая ручка Cappuccino.	4000-AH-CAP
Алюминиевая ручка Moka.	4000-AH-MOK
Алюминиевая ручка Ristretto.	4000-AH-RIS

КИСТОЧКИ N.ERA

ВИБРАЦИЯ, КОТОРАЯ СОЗДАЕТ ОТЛИЧИЕ

Идея N.era bRRRush принадлежит Роберто Деволио, мастер-технику из Куритибы, Бразилия. Наряду с использованием инновационных головок N.era в хвостовике была создана уникальная «зона вибрации».

Когда вы проводите ногтем указательного пальца по поверхности, возникает микровибрация, которая распространяется до кончика кисточки. Небольшое количество облицовочной массы на вашей кисточке почти отделяется и превращается при этом в маленькую каплю, которая очень просто размещается на вашей облицовке. Короткий видеоклип на сайте Smile Line продемонстрирует вам, как впечатляюще функционирует эта техника.

Преимущество этой техники заключается в том, что при облицовке в керамической массе остается существенно меньше воздуха, одновременно это означает меньше пор в облицовке после обжига – сенсационный эффект, прежде всего в зоне режущего края.

Кисточки N.era выпускаются в виде набора из четырех размеров (№ 8, 6, 4 и 1), но, разумеется, их можно заказывать отдельно. Каталожные номера запасных головок соответствуют головкам кисточек N.era с предыдущих страниц.

Если вы традиционно хотите пользоваться головками Колински из натурального волоса, вы также можете заказать отдельно ручку bRRRush.





10

11

Наименование	Кат.номер
N.era bRRRush, набор: кисточки № 8, 6, 4, 1	4200-bRRR-Asst
N.era bRRRush № 8, кисточка в комплекте.	4200-bRRR-8
N.era bRRRush № 6, кисточка в комплекте.	4200-bRRR-6
N.era bRRRush № 4, кисточка в комплекте.	4200-bRRR-4
N.era bRRRush № 1, кисточка в комплекте.	4200-bRRR-1
bRRRush, алюминиевая ручка.	4000-AH-bRRR
Запасные головки № 8	4201-8
Запасные головки №6	4201-6
Запасные головки № 4	4201-4
Запасные головки № 1	4201-1

[NJOY] N.ERA

САМАЯ ЛЕГКАЯ ВЕРСИЯ КИСТОЧЕК N.ERA

По просьбе клиентов Smile Line решили разработать новый ассортимент пестрых, радующих и создающих хорошее настроение экстралегких кисточек N. Era.

Ручки [Njoy], полые внутри, изготовлены из термoplastика ABS и дополнительно покрыты слоем силикона Soft Touch, что обеспечивает особый рабочий комфорт.

Ваш «индивидуальный набор»:

Концепция [Njoy] позволяет создать ваш собственный индивидуальный набор кисточек. Для каждого из четырех размеров кисточек вам предлагается собственный цвет!

ВАЖНО:

Кисточки N.era [Njoy] не имеют сменных головок. Smile Line выбрал эту опцию прежде всего для того, чтобы сохранить максимально малый вес инструмента. Это также позитивно сказывается на цене, при сохранении всех преимуществ N.era!





12

13

MOJITO

N.era [Njoy] MOJITO #8 : кат.номер. 4200-MOJ-8
N.era [Njoy] MOJITO #6 : кат.номер. 4200-MOJ-6
N.era [Njoy] MOJITO #4 : кат.номер. 4200-MOJ-4
N.era [Njoy] MOJITO #1 : кат.номер. 4200-MOJ-1

BLOODY MARY

N.era [Njoy] BLOODY MARY #8 : кат.номер. 4200-BLO-8
N.era [Njoy] BLOODY MARY #6 : кат.номер. 4200-BLO-6
N.era [Njoy] BLOODY MARY #4 : кат.номер. 4200-BLO-4
N.era [Njoy] BLOODY MARY #1 : кат.номер. 4200-BLO-1

SEX ON THE BEACH

N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #8 : кат.номер. 4200-SOB-8
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #6 : кат.номер. 4200-SOB-6
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #4 : кат.номер. 4200-SOB-4
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #1 : кат.номер. 4200-SOB-1

COSMOPOLITAN

N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #8 : кат.номер. 4200-COS-8
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #6 : кат.номер. 4200-COS-6
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #4 : кат.номер. 4200-COS-4
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #1 : кат.номер. 4200-COS-1

BLUE LAGOON

N.era [Njoy] BLUE LAGOON #8 : кат.номер. 4200-LAG-8
N.era [Njoy] BLUE LAGOON #6 : кат.номер. 4200-LAG-6
N.era [Njoy] BLUE LAGOON #4 : кат.номер. 4200-LAG-4
N.era [Njoy] BLUE LAGOON #1 : кат.номер. 4200-LAG-1

YELLOW CAB

N.era [Njoy] YELLOW CAB #8 : кат.номер. 4200-YEC-8
N.era [Njoy] YELLOW CAB #6 : кат.номер. 4200-YEC-6
N.era [Njoy] YELLOW CAB #4 : кат.номер. 4200-YEC-4
N.era [Njoy] YELLOW CAB #1 : кат.номер. 4200-YEC-1

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ КИСТОЧЕК H₂O

ГИГИЕНИЧНО, ЛОГИЧНО, ЭРГОНОМИЧНО



H2O является неотъемлемой принадлежностью, которая дополняет палитру для замешивания керамики на вашем рабочем месте, по вашему выбору с левой или с правой стороны от палитры.

Этот универсальный комплект не только дает возможность прополоскать вашу кисточку в чистой воде и разгладить, с помощью губки из вискозы вы можете сформировать оптимально острую верхушку. К тому же этот комплект дает возможность хранить кисточку погруженной вертикально в воде, в отдельной емкости.

Все компоненты H2O независимы друг от друга. Вы можете менять воду в главной емкости независимо от емкости для хранения ... и наоборот. За счет специального дизайна базисной пластины вы можете свободно по вашему желанию выбирать ее позицию в радиусе 60° в зависимости от того, правша вы или левша.



14

15



Наименование	Кат.номер
H2O в комплекте. Черная базисная пластина, круглая основная емкость для хранения с крышкой, губка из вискозы.	4400
H2O, основная круглая емкость.	4410
H2O, емкость для хранения с крышкой.	4420
H2O, губка из вискозы.	4430

ИНСТРУМЕНТ Smile Line

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ**

Превосходные, эксклюзивные, «индивидуального пошива» инструменты Smile Line на 100% являются модульными системами.

Производство. Каждая комбинация требует более 50 рабочих операций, прежде чем инструмент будет тщательно проверен и упакован. Механические детали изготавливаются в Швейцарии специалистами часовой промышленности и машиностроения. Все заостренные компоненты имеют высочайшее качество и сертифицированное европейское происхождение.

С помощью инструмента SMILE LINE вы можете составить свой собственный комплект инструментов, в зависимости от ваших потребностей, вашего вкуса и вашего восприятия. В любой момент у вас есть возможность пополнить свою коллекцию, создав ее по вашему желанию.

БАЗИСНЫЕ МОДУЛИ



4000-As ручка короткая.



4000-A ручка стандартная.



4000-AH ручка длинная, полая.




4100-CAs ручка из углеродного волокна, короткая.




4100-CA ручка из углеродного волокна, стандартная.




4100-CAL ручка из углеродного волокна, длинная.

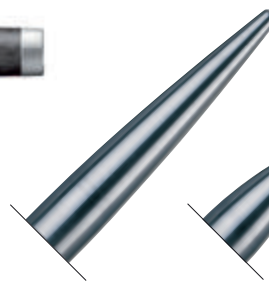

4000-B
заглушка.

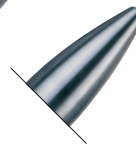

4000-BS
заглушка короткая.

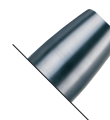

4000-BS
заглушка усеченная.



Каков ваш стиль, какова ваша личность? При существующих и дальше неограниченных возможностях комбинирования, выберите ручку, которая вам больше всего подходит!

И через 10 лет коллекция черных, анодированных, рифленых алюминиевых ручек для тысяч зубных техников стала классикой.

Вы очарованы приятной шелковистой ручкой из дерева? Smile Line предлагает широкий выбор изготовленных из благородного дерева ручек: выберите из 3 видов и 3 различных форм.

Начиная с этого года, углеродное волокно захватило позиции в линии инструментов Smile Line: легкость, высокое качество и эмоции соединились в материале High-Tech с безупречным финишем.



4100-PAs Ручка из полисандра, короткая.



4100-PA Ручка из полисандра, стандарт.



4100-PAL Ручка из полисандра, длинная.



4100-EBs Ручка из эбенового дерева/Мозамбик, короткая.



4100-EB Ручка из эбенового дерева/Мозамбик, стандарт.



4100-EVL Ручка из эбенового дерева/Мозамбик, длинная.



4100-VIs Ручка из фиолетового дерева, короткая.



4100-VI Ручка из фиолетового дерева, стандарт.




4100-VIL Ручка из фиолетового дерева, длинная.

Примечание: наши поставщики работают исключительно с сертифицированными материалами.



- 4100-DPAs Кисточка для удаления пыли в комплекте с ручкой из полисандра.
- 4100-DVIs Кисточка для удаления пыли в комплекте с ручкой из фиолетового дерева.
- 4100-DEBs Кисточка для удаления пыли в комплекте с ручкой из эбенового дерева.
- 4010-DAs Кисточка для удаления пыли в комплекте с ручкой из алюминия.

МОДУЛИ, КИСТОЧКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЕРАМИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

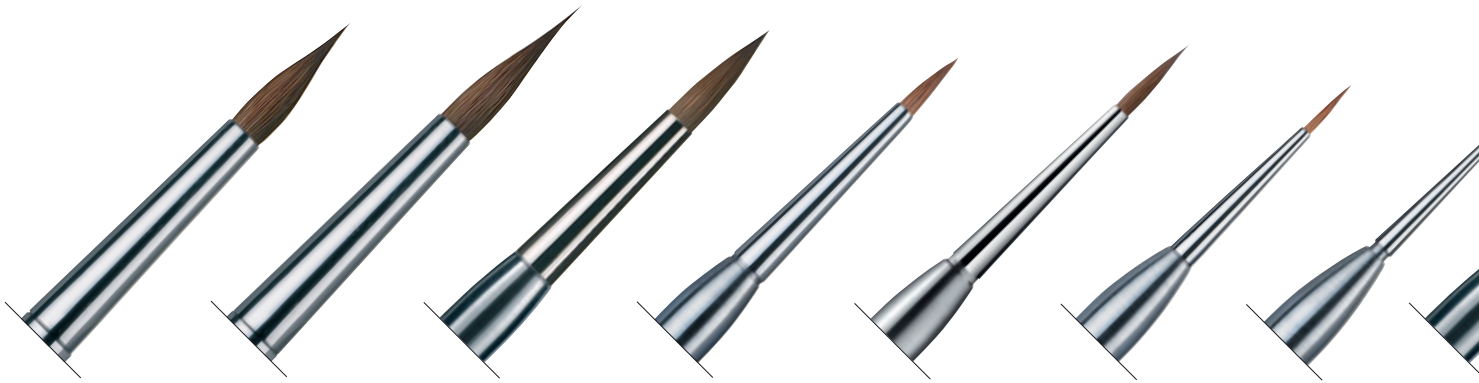

4100-XR Головка кисточки Колински #8-R, корпус-нержавеющая сталь.

4100-XLT Головка кисточки Колински #8-LT, корпус-нержавеющая сталь.


4000-VG Головка кисточки Колински #6.
4001-VG Запасные головки к кисточке #6.

4000-LC Модуль, корректировочная кисточка #5.
4001-LC Запасные головки к кисточке #5.

4000-W Модуль Колински, головка кисточки #4.
4001-W Запасные головки к кисточке #4.

4000-N Модуль, кисточка для глазури #2.
4001-N Запасные головки к кисточке #2.

4000-O Модуль, кисточка для красок #3/0.
4001-O Запасные головки к кисточке #3/0.

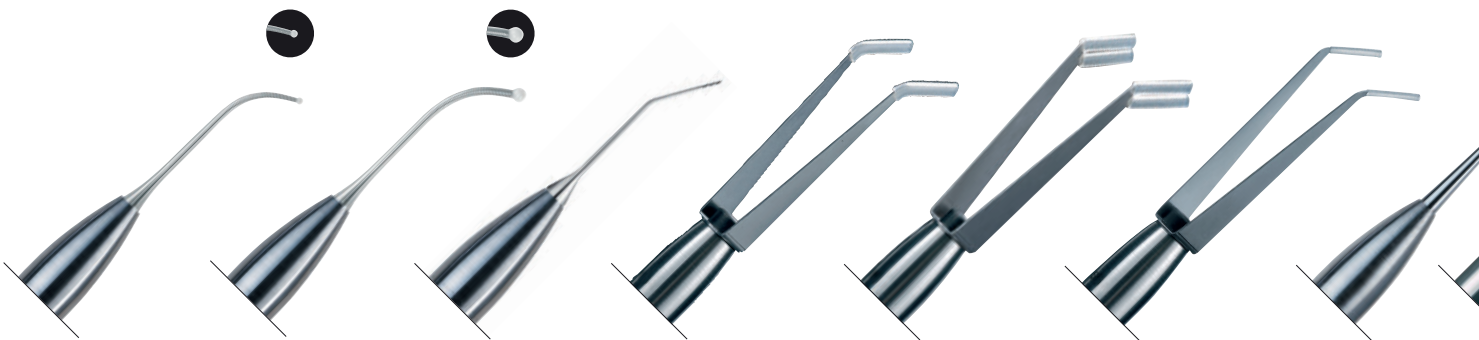

4000-OP1 Инструмент для обработки опала, шарик Al2O3, малый.

4001-OP1 Запасные шарики, малые.

4000-OP2 Инструмент для обработки опала, шарик Al2O3, большой.

4001-OP2 Запасные шарики, большие.

4000-STE Зонд для порошка керамики, ступенчатый 0,5 мм.

4000-SG1 Модуль Soft-Grip, одинарный.
4010-SG1 Инструмент в комплекте (4000-A+BS+SG1).

4000-SG2 Модуль Soft-Grip, двойной.


4010-SG2 Инструмент в комплекте (4000-A+BS+SG2).

4000-SG3 Модуль Soft-Grip, мини.

4010-SG3 Инструмент в комплекте (4000-A+BS+SG3).

4000-Q Ложка, длинная.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВОСКА, МОДУЛИ

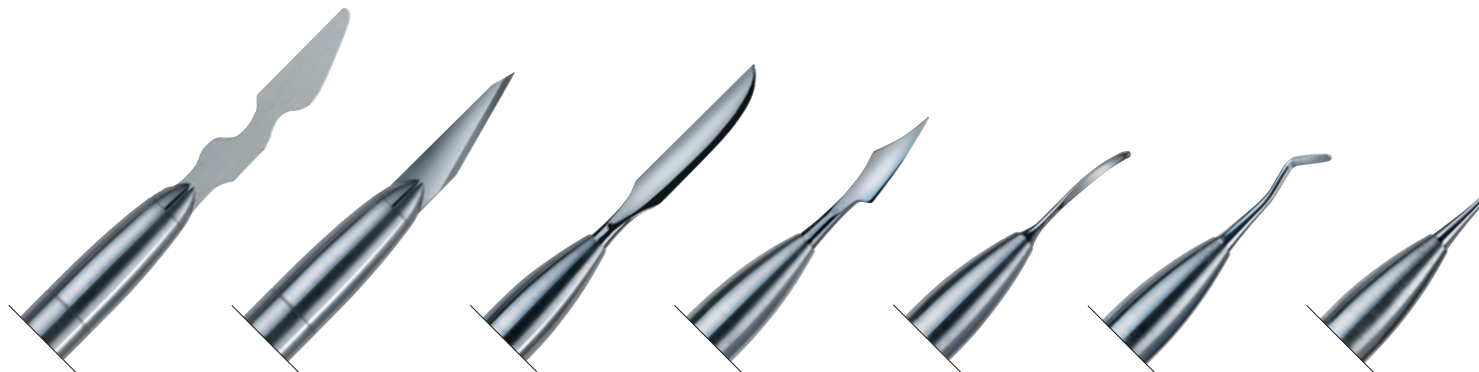

4000-СМ Универсальный шпатель, модуль.

4001-СМ Лезвия для шпателя.

4000-СS Скальпель, модуль.

4001-СS Лезвия для скальпеля.

4000-D Lacrox.

4000-E Zahle, нож.

4000-F Zahle, шпатель.

4000-G Ложка, короткая.

4000-H 1/2 Hollenback.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПОЗИТОВ, МОДУЛИ



4000-S1 Шпатель для композитов #1.

4010-S1 Инструмент в комплекте (4000-AH+S1).




4000-S2 Шпатель для композитов #2.

4010-S2 Инструмент в комплекте (4000-AH+S2).



4000-S3 Шпатель для композитов #3.

4010-S3 Инструмент в комплекте (4000-AH+S3).

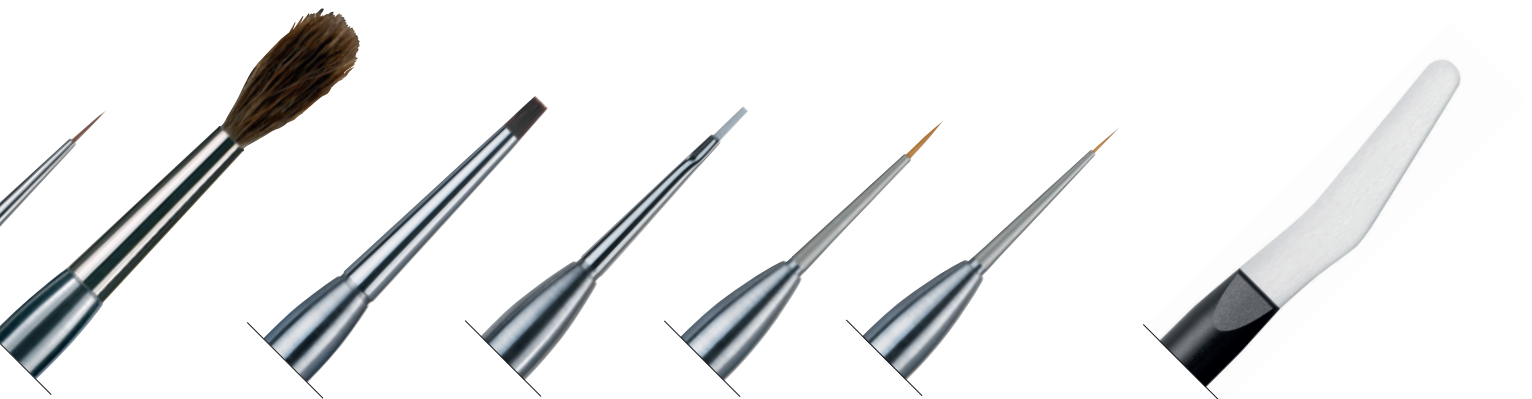

4000-VD Кисточка для удаления пыли, модуль.

4000-LD Кисточка для опак-пасты, большая, модуль.

4001-LD Запасные головки.

4000-M Кисточка для опак-пасты, малая, модуль.

4001-M Запасные головки.

4000-Sy0 Кисточка SynTec #0, модуль.

4001-Sy0 Запасные головки #0.

4000-Sy3/0 Кисточка SynTec #3/0, модуль.


4001-Sy3/0 Запасные головки #3/0.

4000-ZR Циркониевый шпатель, модуль.


4010-ZR Циркониевый шпатель в комплекте, ручка 4000-AH.



4000-R Рифленый инструмент.

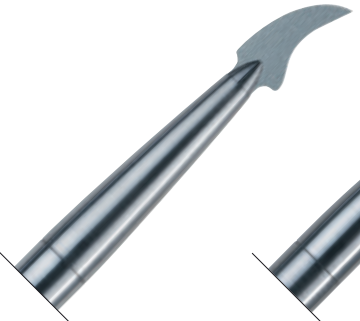

4000-P Лезвие для керамики, модуль.

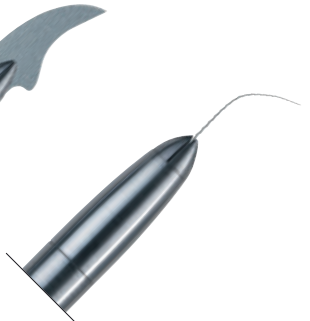

4000-CR Файл Hedstroem, модуль.



4001-P Стандартное лезвие, 75 м.

4001-P1 Лезвие с микрорубцами, 75 м.

4001-P2 Лезвие с вырезом, 75 м.

4001-P3 Нейтральное лезвие, 75 м.


4001-P4 Расширитель Hedstroem.

4001-CS Лезвие для скальпеля.

4001-Z Набор лезвий.

18

19

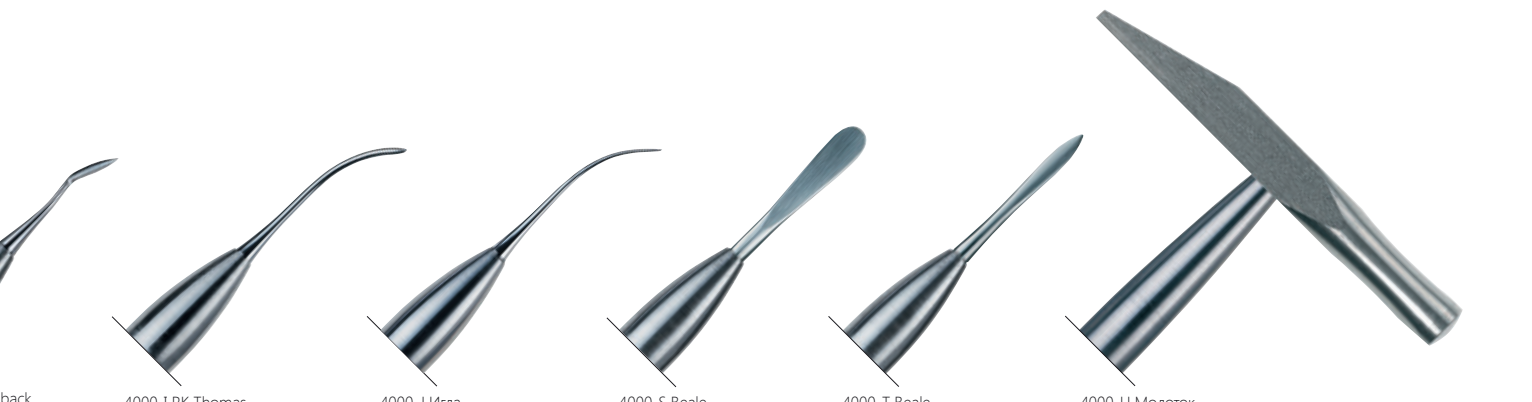

4000-I PK Thomas.

4000-J Игла.

4000-S Beale, шпатель.

4000-T Beale, заостренный инструмент.

4000-U Молоток, модуль.



4000-R1 Каучуковая заостренная головка #1, стамеска.

4010-R1 Инструмент в комплекте (4000-AH+R1).



4000-R2 Каучуковая заостренная головка #2, конус.

4010-R2 Инструмент в комплекте (4000AH+R2).



4002 Настольная подставка для инструментов, нержавеющая сталь.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЕРАМИКИ

ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ СТРАСТЬ К ТОМУ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ

Наборы для обработки керамики сориентированы на ваши потребности. Некоторые инструменты являются разработками и инновациями фирмы Smile Line (шпатель из оксида циркония – инструмент для опак - Soft-Grip – рифленый инструмент). Другие являются более традиционными, как например, инструменты для среза керамики (сверхтонкие лезвия, расширители, инструмент в форме ложек). Наши кисточки Колински характеризуются высочайшим качеством и отличным ассортиментом. Качество каждой верхушки кисточки Колински проверяется отдельно, строгие нормы этого мы ввели для наших партнеров, мастеров по изготовлению кисточек.

Мы убеждены, что этот набор инструментов будет с вами много лет при создании уникальных реставраций.

Важная информация: Для тех из вас, кто при изготовлении своих dentальных шедевров предпочитает наши эксклюзивные кисточки N.era, предлагаются те же наборы инструментов «Конфигурация N.era». Все детали и каталожные номера вы найдете в конце страницы.



Наименование	Кат.номер
Набор инструментов для керамики, вкл. высококачественные кисточки Колински (#8-R и #3/0). Всего 8 инструментов для 6 черных анодированных алюминиевых ручек, набор экстратонких лезвий, вкл. микроволоконную салфетку.	14050-K
Набор инструментов для керамики, вкл. волоконные кисточки N.era (#8 и #1). Всего 8 инструментов для 6 черных анодированных алюминиевых ручек, набор экстратонких лезвий, вкл. микроволоконную салфетку.	14050-N
Футляр для инструментов, магнитный замок, микроволоконная салфетка.	14999

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОСКА

ТРАДИЦИОННО ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

Уже 20 лет идеи и инновации являются частью деятельности фирмы Smile Line. Без вопросов. Несмотря на это Smile Line никогда не откажется от традиций там, где это необходимо.

Инструменты для обработки воска заслуживают с нашей точки зрения всякого уважения в качестве традиции. Инструмент Le Stop или Zahle необходимы постоянно, пока мы работаем с воском. Это как раз философия, которой мы следуем, предлагая набор инструментов для обработки воска: все изготовлено в Швейцарии или европейскими специалистами. Эксклюзивно.

Мы, со своей стороны, желаем вам только одного: подлинного гибрида очень высокого качества и долговечности.



Наименование	Кат.номер.
Набор инструментов для воска, 10 инструментов для 6 черных анодированных алюминиевых ручек, микроволоконная салфетка.	14060
Футляр для инструментов, магнитный замок, микроволоконная салфетка.	14999

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПОЗИТА

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОМФОРТНО, ИННОВАЦИОННО

Как и все инструменты в программе Smile Line, новый набор для обработки композита является модульной системой. Это единственный из четырех наборов, включающий дополнительную рифленую ручку без соответствующего инструмента. Мы предполагали, что вы, может быть, хотели бы создать двойной инструмент, используя гибкий шпатель или каучуковую головку, вместо того, чтобы использовать их как отдельные инструменты.



20

22

Наименование	Кат.номер.
Набор инструментов для композита, 5 инструментов. Для 6 черных анодированных алюминиевых ручек, микроволоконная салфетка.	14070
Футляр для инструментов, магнитный замок, микроволоконная салфетка.	14999

Я ТВОРЮ... МЫ ТВОРИМ

ОБЪЕКТ СТРАСТНОГО ЖЕЛАНИЯ

Эти несколько слов имеют простую цель: они приглашают вас на несколько моментов задержать дыхание, избавиться от давления, создав вокруг себя тишину, чтобы удостоить внимания одно: я творю!

Четыре набора инструментов Smile Line представляют собой вершину, наилучшие инструменты для зубных техников. Они были придуманы и созданы, чтобы привлечь внимание лиц, которые вкладывают свои эмоции в свою работу и ее креативный аспект, для Вас.

Может быть, только один совет: не оставляйте свой личный набор – до вашего возвращения он может исчезнуть!



ОТВЕРТКИ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ


НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ

Smile Line создал новый стандарт, включающий 8 различных наиболее часто используемых отверток для систем имплантатов (Nobel Biocare/ Strauman/ Astra Tech/ 3i/ Camlog/ SPI/ Ankylos/ Friadent). Каждая отвертка выпускается двух размеров длины: стандарт или экстра длинная.

Для простой и быстрой идентификации каждая отвертка имеет цветовую кодировку. Для хранения бокс обеспечивает соответствующий порядок размещения всех отверток.

Вы можете заказать полный набор отверток (стандартная длина), уже смонтированных, с анодированным алюминиевым держателем, или сами скомплектовать все компоненты согласно вашим потребностям.

Индивидуальность – модульная система. По желанию вы можете заказать отвертку с держателем или без него, или, например, с деревянным держателем (стр.19). Другая возможность – выбор «черного варианта» (черное анодирование).

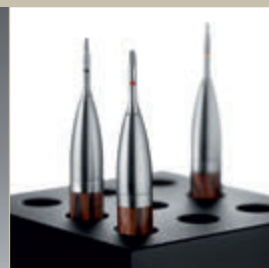

1 Nobel Biocare/ Strauman/ Astra Tech/ 3i/ Camlog/ SPI/ Ankylos/ Friadent – зарегистрированные товарные марки.

Наименование	Кат.номер
Набор отверток для имплантатов в комплекте, 8 отверток (стандартная длина) и алюминиевый анодированный бокс, цвет натуральный.	4300
Алюминиевый бокс, анодированный, цвет натуральный, отдельно.	4301
Алюминиевый бокс, анодированный, цвет черный, отдельно.	4302
Ключ с ограничением усилия.	4310

Возможны два варианта заказа отверток для имплантатов (см. иллюстрацию ниже). Уже смонтированные (4010-L-STR) или собираемая из отдельных модулей (4000-BC + 4000-As + 4000-FRI).



Отвертка, совместимая с Nobel¹ Biocare.



Отвертка, совместимая с Straumann¹.



Отвертка, совместимая с Astra-Tech¹.



Отвертка, совместимая с Zi¹



Отвертка, совместимая с Camlog¹



Отвертка, совместимая с Ankylos¹



23
25

Отвертка, совместимая с Friadent¹



Отвертка, совместимая с SPI¹



Универсальная отвертка, 1,4 мм.
(предлагается также 2,5 мм)



КЛЮЧ С ОГРАНИЧЕНИЕМ УСИЛИЯ

Для абсолютной точности при затягивании винтов на работе с имплантатами Smile Line разработал ключ с ограничением усилия, который оптимально отрегулирован. Контролируемое ограничение усилия составляет 9 Ncm. Каждый ключ с ограничением усилия поставляется с адаптером (4000-BD). Несовместим с деревянными ручками



4310 Ключ с ограничением усилия.



4000-BD Адаптер ручки.

¹ Nobel Biocare/ Strauman/ Astra Tech/ Zi/ Camlog/ SPI/ Ankylos/ Friadent – зарегистрированные товарные марки.

MICRO-VIBES

ПРЕОБРАЖАЕТ ВАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ

Micro-Vibes является многофункциональным инструментом для зуботехнических работ.

Благодаря эксцентрику в микромоторе возникает микровибрация, которая обеспечивает вам существенные преимущества:

- Смешивание керамических масс, опак-паст и красок
- Уплотнение для закрытия пустот в интердентальной зоне
- Равномерное нанесение тонкого слоя опак-паст, порошка и/или опак-паст, лайнеров для оксида циркония
- Замешивание материалов как опак-паст или красок
- Помощь при установке коронок и мостовидных протезов на модели



Наименование	Кат.номер
Micro-Vibes, модель с гибким шпателем для замешивания.	01000-MVS
Micro-Vibes, модель с шариком Al2O3 для опака и лайнера.	01000-MVOP
Micro-Vibes, пластмассовый шпатель для замешивания.	01010-MV
Micro-Vibes, шпатель для замешивания, натуральное волокно (рог),	01011-MV
Micro-Vibes, инструмент с шариком Al2O3 для опака и лайнера.	01020-MV
Запасной инструмент с двумя шариками Al2O3 для опака и лайнера.	01025-MV
Батарейки 1,5 V AAAA.	01030-MV
Комплект винт-шестигранный ключ-кольца (O'Ring).	01040-MV
Micro-Vibes, микромотор, модуль в комплекте.	01100-MV



#01000-MVS







#01000-MVOP



26

27

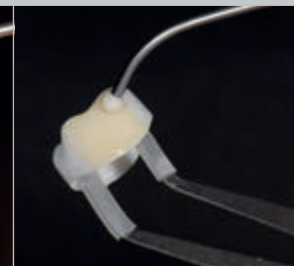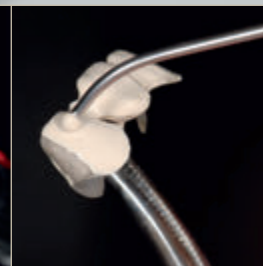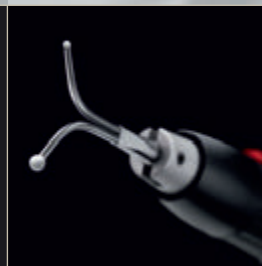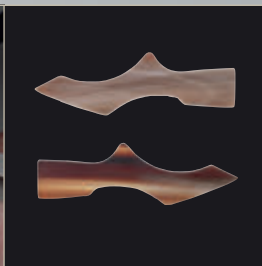

5 ОПЦИЯ 1

Smile Line рекомендует шпатель из рога того же дизайна. Эти естественные волокна обладают высоким уровнем гибкости и обеспечивают отличную передачу колебаний.

5 ОПЦИЯ 2

Возможно также заказать отдельно особый инструмент с двумя концами и двумя шариками Al₂O₃ разного размера. Шарик размером 2 мм и 1 мм очень полезны, например, для работы в interdentalных зонах.

U-MID CLASSIC

ПАЛИТРА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ КЕРАМИКИ

С момента появления в 1994 году палитра для замешивания керамики U-Mid стала классикой в сегменте палитр для замешивания керамики. Неоспоримые преимущества для повседневной работы:

автоматическое увлажнение керамической массы – стабильная консистенция – не требуется замешивание – экономия времени и комфорт – экономичный расход порошка керамики – эргономичность.

ОРИЕНТИР - МАТЕРИАЛЫ HI-TECH

Комбинация различных фильтров обеспечивает надежность в работе. Пористая пластина из спеченой керамики переносит жидкость из резервуара на поверхность. Мембрана на поверхности пластины регулирует влажность. Оба компонента легко чистятся: пористая пластина в пароструйном аппарате, мембранный фильтр - под текущей водой.

Палитра U-Mid Classic выпускается в двух форматах: большом (240x135 мм) и малом (150x73 мм). В качестве дополнения Smile Line предлагает микропористые мембраны: наряду с традиционными белыми также черные мембраны.

U-Mid Stains - Smile Line рекомендует U-Mid Stains, палитру для красок, которая также функционирует на основе принципа капилляров, но имеет другой микропористый мембранный фильтр. В комплект, конечно, включена соответствующая жидкость для красок.



Наименование	Кат.номер.
Комплект U-mid Classic, вкл. контейнер с крышкой, пористую пластину, 2 белых микропористых мембранных фильтра (240x135 мм), моделировочную жидкость U-mid Advanced, 250 мл.	1080
Пористая керамическая пластина U-mid (240x135x6 мм), 1 шт.	1081
U-mid белый микропористый мембранный фильтр, (240x135 мм), 2 шт.	1074
U-mid черный микропористый мембранный фильтр, (240x135 мм), 2 шт	1076
Комплект Light U-mid Classic, вкл. контейнер с крышкой, пористую пластину, 2 белых микропористых мембранных фильтра (150x73 мм), моделировочную жидкость U-mid Advanced, 100 мл.	1030-N
Light, пористая керамическая пластина (150x73x6 мм)	1031
Light, белые микропористые мембранные фильтры (150x73 мм), 2 шт.	1032
Light, черные микропористые мембранные фильтры (150x73) мм, 2 шт	1033

Наименование	Кат. номер.
Stains пористая керамическая пластина (150x73x6 мм)	1021
Stains белый микропористый мембранный фильтр (150 x 73 мм), 2 шт.	1022
Жидкость для красок U-Mid Stains, 100 мл.	1112
Жидкость для красок U-Mid Stains, 15 мл.	1113
Комплект U-Mid Stains, вкл. контейнер с крышкой, керамическую пористую пластину, 2 белых мембранных фильтра (150x73 мм), моделировочную жидкость U-Mid Stains, 100 мл.	1020-N


U-MID EVO 3

ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ ОТ ДИЗАЙНА И ОТ ЭРГОНОМИКИ

Те, кто хочет работать, используя классическую капиллярную систему U-mid (пористый, керамический вкладыш и микропористый мембранный фильтр), получают теперь в свое распоряжение новый контейнер EVO3!

Захватывает дух дизайн с встроенным выдвижным ящиком для красок (см. также стр. 37).

Технология и габариты соответствуют по всем пунктам U-mid Classic, таким образом, благодаря новому дизайну вы можете открыть для себя новый комфорт в работе, заимствованный в эргономике ноутбука.

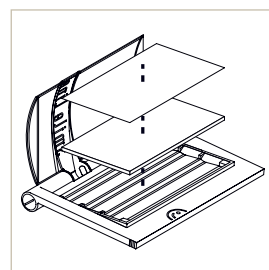

28

29

Наименование	Кат.номер.
U-mid EVO3 в комплекте, контейнер с крышкой и выдвижным ящиком для красок, керамическая пластина-фильтр, 2 белых мембранных фильтра, моделировочная жидкость U-mid ADVANCED 15 мл	2080
Пористая керамическая пластина U-mid (240x135x6 мм), 1 шт.	1081
Белый микропористый мембранный фильтр U-mid (240x135 мм), 2 шт.	1074
Черный микропористый мембранный фильтр U-mid (240x135 мм), 2 шт.	1076

Наименование	Кат.номер.
Моделировочная жидкость U-mid ADVANCED, 250 мл	1140
Моделировочная жидкость U-mid ADVANCED, 1000 мл	1141
Моделировочная жидкость U-mid ADVANCED, 5000 мл	1142
Моделировочная жидкость U-mid ADVANCED, концентрат, 200 мл	1150

WET'N'DRY EVO 3

ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОДАРЯ НАНО-ТЕХНОЛОГИИ

WET'N'DRY EVO3 поставляется со стеклянной пластиной, которая имеет 6 прецизионных шлиц. В эти шлицы вертикально вставляются целлюлозные полоски, которые абсорбируют жидкость из резервуара и переносят ее на поверхность. В результате ваша керамическая масса приобретает желаемую консистенцию на несколько дней.

Фоновый цвет – ваш выбор: в комплект с новой версией Wet'n'Dry включены 3 экстра тонкие (0,3 мм), непрозрачные ПВХ пленки, которые могут быть размещены под стеклянной пластиной. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать белый или серый или черный фон для своей рабочей поверхности!



Наименование	Кат.номер
Wet'n'Dry EVO3 в комплекте, контейнер с выдвигаемым ящиком для красок, стеклянная пластина для замешивания, 3 экстра тонких непрозрачных ПВХ пленки (белая-серая-черная), 50 полосок из целлюлозы, моделировочная жидкость U-mid ADVANCED, 100 мл, моделировочная жидкость для красок U-mid 15 мл, гидрофобный раствор NANO, 15 мл.	12090
Запасная стеклянная пластина для замешивания 240x135 мм, 3 экстра тонких непрозрачных ПВХ пленки (белая-серая-черная), 50 полосок из целлюлозы, гидрофобный раствор NANO, 15 мл	11091
Wet'n'Dry, 50 полосок из целлюлозы.	11094
Wet'n'Dry, экстра тонкие непрозрачные ПВХ пленки (белая-серая-черная), 3 шт..	11095
Гидрофобный раствор NANO, 15 мл.	1160

Вместе с Wet'n'Dry EVO3 вы получите маленький флакон с инновационной жидкостью: «гидрофобный раствор NANO». Речь идет о разработке химического раствора, с помощью которого вы можете просто кондиционировать поверхность стеклянной пластины: он снимает поверхностное напряжение стекла.

Воздействие на ваши керамические массы удивительное: вместо того, чтобы растекаться или со временем уплотняться, ваши массы сохраняют превосходную консистенцию – рабочая поверхность остается чистой. Удивительный эффект виден при облицовке: если вы используете только дистиллированную воду, вы получаете фантастическую пластичность.




WET'N'DRY 3 CLASSIC

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЦЕНОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Новая NANO технология теперь доступна и для палитр для замешивания керамики линии «Classic» фирмы Smile Line. Wet'n'Dry Classic соединяет в себе высокие технологии и привлекательную цену, доступную для всех лабораторий.

Каждый комплект включает флакон моделировочной жидкости U-mid ADVANCED, а также флакон гидрофобного раствора NANO.

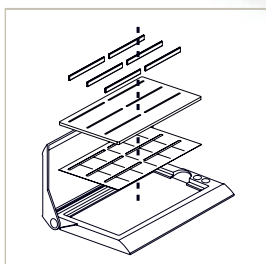

30

32

Наименование	Кат.номер
Wet'n'Dry 3 Classic в комплекте, вкл. контейнер, стеклянную пластину для замешивания, 3 сверхтонких непрозрачных пленок ПВХ (белая, серая, черная), полоски из целлюлозы	
50 шт., моделировочная жидкость U-mid ADVANCED, 100 мл, гидрофобный раствор NANO, 15 мл	11090
Запасная стеклянная пластина для замешивания 240x135 мм, 3 экстра тонких непрозрачных ПВХ пленки (белая-серая-черная),	
50 полосок из целлюлозы, гидрофобный раствор NANO, 15 мл.	11091
Wet'n'Dry, 50 полосок из целлюлозы.	11094
Wet'n'Dry, экстра тонкие непрозрачные ПВХ пленки (белая-серая-черная), 3 шт.	11095
Гидрофобный раствор NANO, 15 мл.	1160

EVO 3

УЛЬТИМАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА!

Уникальная – Smile Line предлагает 2 различных технологии, выбирайте соответствующую для вашего рабочего стиля.

2 в 1 – каждая палитра имеет выдвижной ящик для красок.

База EVO 3 полностью покрыта черным лаком, удобна в использовании, отсутствует рефлексия света. Как результат интенсивных эргономических исследований фронтальная часть напоминает LapTop, приложите свою руку и наслаждайтесь оптимальным комфортом.

Отверстие с двух сторон рабочей поверхности позволяет легко наполнять емкость независимо от того, являетесь ли вы левой или правой рукой. Крышка изготовлена из противоударного поликарбоната и может легко сниматься с базы.

Наборы уже включают необходимые компоненты: 1 флакон моделировочной жидкости U-mid ADVANCED, U-Mid Stains и гидрофобный раствор NANO (Wet'n'Dry).

EVO3 несомненно одна из самых эксклюзивных палитр для замешивания керамики на влажной основе, которая когда-либо была представлена на рынке.

33



TINTO

ЗАМЕШАНО, СОХРАНЕНО, ИСПОЛЬЗОВАНО

Палитры для замешивания керамики Tinto позволяют хранить уже замешанные продукты, как например, краски или opak-пасту, защищенными от пыли. Хотя они имеют традиционную конструкцию (без эффекта капилляров – усиленный полипропилен), палитры Tinto обладают явными положительными качествами за счет уникального дизайна, эргономики и компактности (118 x 118 x 25 мм).

Благодаря крышке из прозрачной пластмассы можно в любой момент иметь обзор содержания отдельных пластин.

Сегодня стоматологические лаборатории часто работают с различными марками облицовочных керамик.

Конструкция Tinto позволяет складывать их штабелем, таким образом, экономит много места. Чтобы обеспечить лучший обзор, боковые поверхности легко надписать маркером.

Предлагается 2 модели: первый вариант с 9 углублениями диаметром 18 мм, а также одним более узким и глубоким углублением для жидкости. Второй вариант с 15 углублениями диаметром 14 мм, а также двумя более узкими и глубокими углублениями для жидкостей.

Tinto поставляется в двух вариантах, можно выбрать между двумя идентичными пластинами или двумя пластинами, по одному из указанных выше вариантов.





34

35



Наименование	Кат.номер.
Tinto, набор из двух пластин с 9 и 15 углублениями.	1300
Tinto, набор из двух пластин с 9 углублениями.	1309
Tinto, набор из двух пластин с 15 углублениями.	1315

MY SHADE GUIDE МОЯ РАСЦВЕТКА

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ РАСЦВЕТКИ

Уже очень давно известны и используются расцветки, изготовленные промышленным способом. Однако, возможности этих расцветок ограничены. С одной стороны, материал, из которого изготовлена расцветка, не соответствует используемому материалу (например, облицовочная керамика). Это приводит к неточностям и в результате к трудностям при выборе цвета и повышенному риску с точки зрения конечного результата. С другой стороны, точно определить цвет не всегда просто. Ни толщина, ни облицовка образцов, изготовленных промышленным способом, по многим параметрам не соответствуют реальности в повседневной работе в лаборатории.

С учетом этого фирма Smile Line поставила цель предложить возможность создания и изготовления собственной индивидуальной расцветки, которая больше соответствует реальности.




Наименование	Кат.номер.
«Моя расцветка» в комплекте, вкл.: прочное алюминиевое основание с крышкой из полихлорвинила, 5 держателей, 25 штифтов/зажимов, форму из искусственных волокон, изолирующее средство для керамики 8 мл, 2 стеклянные пластины, 2 тонких лезвия.	7500-N
Штифты/зажимы, 100 шт.	7520-N
Штифты/зажимы (25 шт.) + держатель (5 шт.)	7522-N
Зажимы, 100 шт.	7525-N
Форма из искусственных волокон, 2 шт.	7530
Стеклянные пластины для расширения конструкции, 5 шт.	7550
Экстра тонкие лезвия, 2 шт.	7560
Изолирующее средство для керамики, 2 x 8 мл.	7570
Алюминиевый бокс с крышкой из ПВХ.	7590

ПРЕЦИЗИОННО – ЭЛЕГАНТНО – ЭРГОНОМИЧНО – ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Концепция «Моей расцветки» включает все компоненты, инструменты и аксессуары для изготовления собственных образцов керамики и, таким образом, собственных персонализированных расцветок высокого качества.

Система «Моя расцветка» - это не только инструмент для простого и более точного определения цвета, это и отличный обучающий инструмент, который обеспечивает, например, обучающемуся и даже эксперту еще лучшее понимание при работе с керамическими массами.

РЕАЛЬНЫЕ ЦВЕТА – ГИБКОСТЬ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ – ОБУЧАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ЭРГОНОМИЧНОСТЬ – ПРОСТОТА.

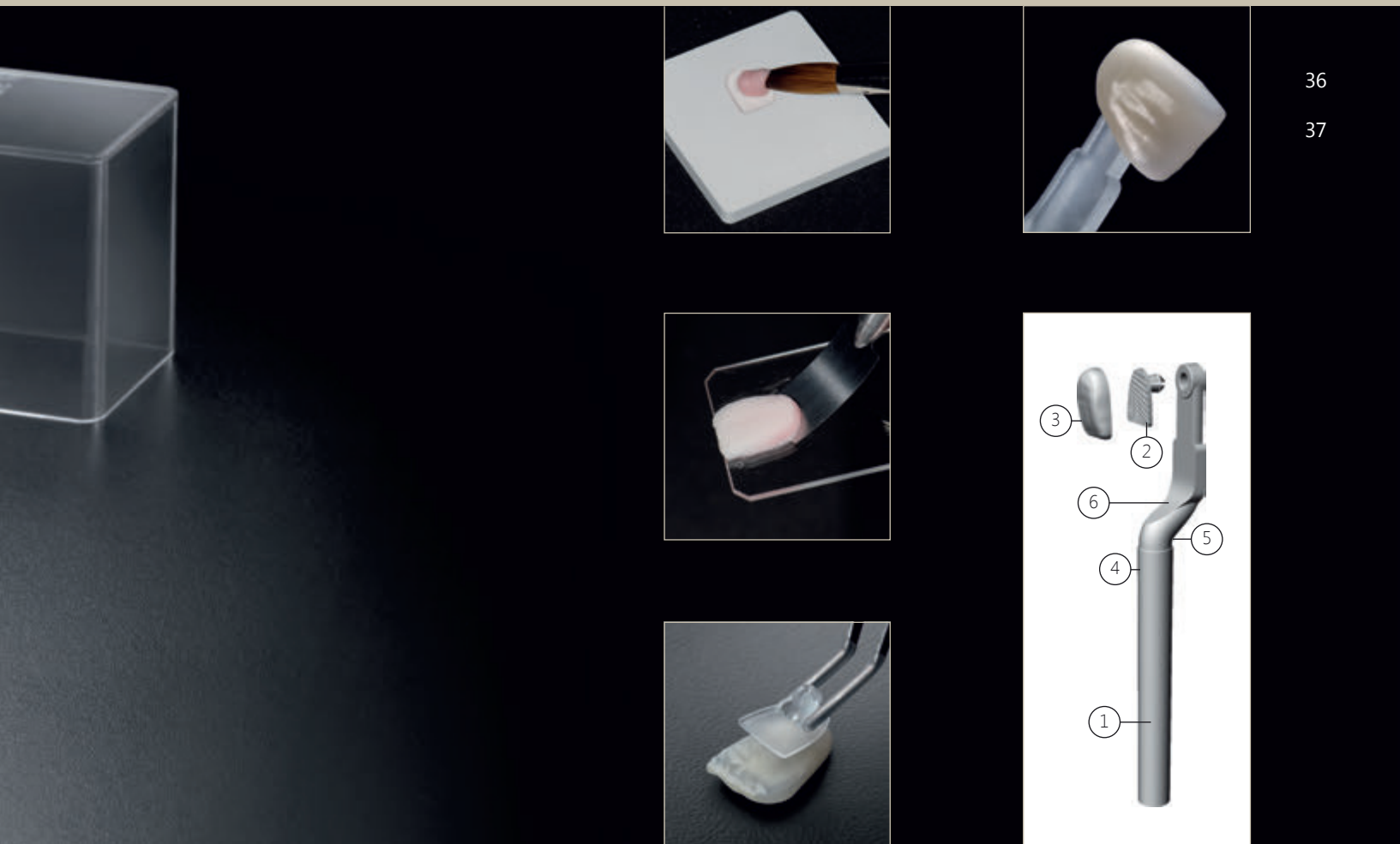

▲ Принадлежности, поставляемые с системой «Моя расцветка», позволяют просто изготавливать собственные пробы керамики.

- 5 1 – Штифт
- 2 – Зажим
- 3 – Образец керамики
- 4 – Зона соединения
- 5 – Анатомический дизайн
- 6 – Маркировка поверхности

ПРОБНЫЕ ПЛАСТИНКИ ИЗ КЕРАМИКИ И КОМПЗИТА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБОРА ПРОБ

Маленький прецизионный инструмент позволяет изготавливать пробные пластинки различной толщины из керамики, а также из композита, быстро и просто. Очень полезно при индивидуальных смешиваниях и тестовых обжигах (новая керамика, тестовые обжиги и т.д.).

Дозаторы для керамики обеспечивают забор точного количества порошка из емкости. Незаменим для точных дозировок. Порции составляют 50, 25, 5 и 1 мм³ в зависимости от рабочей стороны инструмента.

Планшет из ламинированного картона позволяет наклеивать и архивировать индивидуальные керамические пластинки.



Наименование	Кат.номер.
Комплект, вкл. инструмент для забора проб, дозаторы 50-25 и 5-1, планшет.	7010
Инструмент для забора проб	7015
Планшет, 5 шт.	7016
Дозатор 50-25	4010-A
Дозатор 5-1	4010-B

КОНТРАСТОРЫ FLEXIPALETTE

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ

В партнерстве с Styleitaliano, коллективом страстных исследователей и врачей-стоматологов, Smile Line представляет серию инновационных черных контрасторов для дентальной фотографии, Flexipalette.

Flexipalette состоит из медной фольги, которая на 100% покрыта сертифицированным для медицинских целей, не содержащем латекса и гипоаллергенным силиконом.

- Контрасторы можно стерилизовать в автоклаве при 135°C;
- Контрастор полностью не прозрачен, отсутствует рефлексия;
- Контрастор имеет мягкую поверхность, она не вызывает неприятных ощущений у пациента;
- Контрастор может гнуться на 30° - 45°, поэтому может анатомически адаптироваться.

Посетив сайт Smile Line, вы найдете учебный видеофильм о применении и преимуществах контрастора.



38

39



С контрастором.

Без контрастора.

Контрастор А



Контрастор В



Контрастор С



Контрастор
«соответствие цвета»



Наименование

Контрастор, набор, 4 шт.
Контрастор, форма А
Контрастор, форма В
Контрастор, форма С
Контрастор «соответствие цвета»

Кат.номер.

FP-3100
FP-3001
FP-3002
FP-3003
FP-3004

COMPO CUBO

БОЛЬШОЙ КОМФОРТ ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИЦОВОЧНЫМИ КОМПОЗИТАМИ



Наименование	Кат.номер
Compo Cubo, в комплекте.	4600
Compo Cubo, пластина для замешивания.	4600-1
Compo Cubo, сегмент для красок, 9 углублений.	4600-2
Compo Cubo, сегмент для жидкости и губки.	4600-3
Compo Cubo, крышка.	4600-4
Compo Cubo, запасные губки.	4610

Инструменты см на ст. 20-21

КОМПАКТНЫЙ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ

Сотро Кубо был разработан для создания максимального комфорта при обработке светоотверждаемых облицовочных композитов. Изготовленный из массивного полиуретана (PU), Сотро Кубо включает 4 независимых сегмента, обеспечивая много свободного места на рабочем месте.

Сегмент 1: База, стабильная и основательная, предназначена для кондиционирования / замешивания облицовочных композитов, полиуретановая поверхность не липнет и поэтому идеально подходит для облицовочных композитов.

Сегмент 2: второй сегмент имеет 9 углублений для хранения красок.

Сегмент 3: третий сегмент имеет два углубления для жидкостей и одно для губки. Она используется для удаления излишков жидкости.

Сегмент 4: крышка защищает замешанный материал от пыли и от света.

Сотро Кубо очень компактен (72x72x72 мм), поэтому требует очень мало места. Если вы хотите сформировать собственный индивидуальный Сотро Кубо, возможно заказать каждый сегмент отдельно.

40

41



ORGAN.EZ

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ БОРОВ



Наименование

ORGAN.EZ, АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ БОРОВ (HS&FG)

Кат.номер

8100



Некоторые видят сначала только скульптуру. Но не дайте себя ввести в заблуждение. ORGAN.EZ очень полезен и эргономичен.

С помощью этой системы могут быть рассортированы алмазные боры, фрезы и полиры, которые вы предпочитаете. Вы будете знать, что они всегда на правильном месте и их не надо долго искать.

МАССИВНЫЙ АЛЮМИНИЙ...

ORGAN.EZ очень стабилен. Удобно вставлять и брать боры благодаря коническим углублениям.

ORGAN.EZ обеспечивает место максимально для 63 вращающихся инструментов, диаметр хвостовика 2.35. Дополнительно на нижнем уровне есть 8 углублений для турбинных боров.

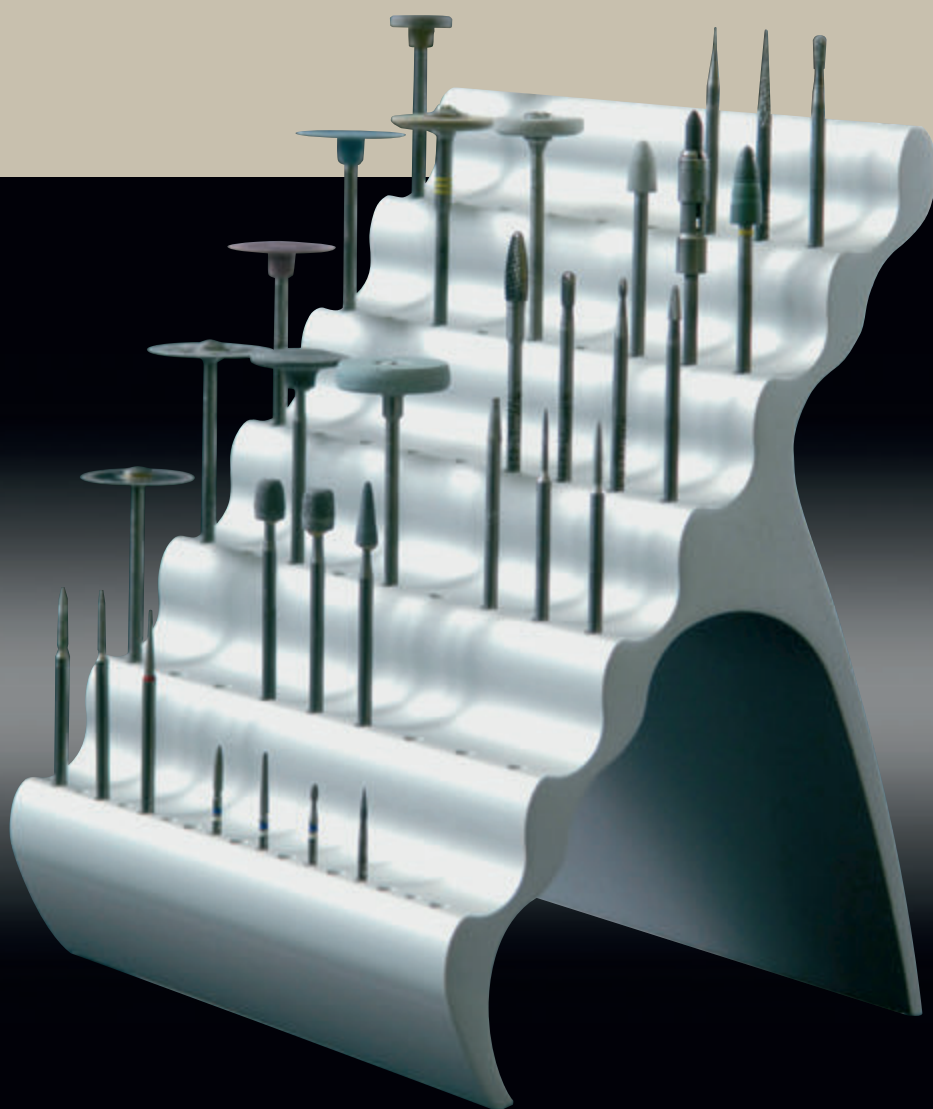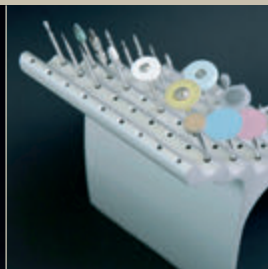

42

43


FIRING TRAY

ТРЕГЕР ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ


Сотовые трегеры дают неограниченные возможности для позиционирования коронок и мостовидных протезов.

В стартовый набор включены два размера (45x45 мм и 55x55 мм), они предлагаются также отдельно.



Штифты для обжига изготовлены из оксида алюминия, цилиндрическая форма регулируется индивидуально. Штифты поставляются трех размеров (диаметр 2, 3 и 5 мм).

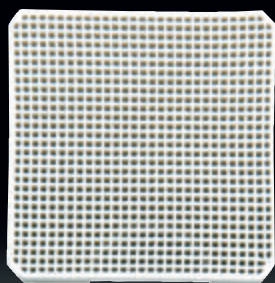

45 x 45 x 12 mm

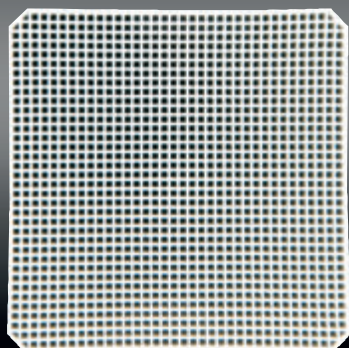

55 x 55 x 12 mm

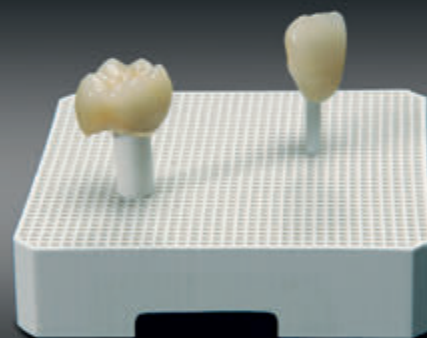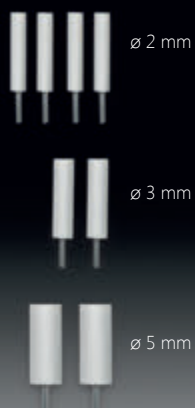

Наименование	Art.-Nr.
Комплект для обжига керамики вкл. по 1 трегеру из муллита 45x45 мм и 55x55 мм, штифты из оксида алюминия (4x2 мм, 2x3 мм, 2x5 мм).	9010
Трегер из муллита, 45x45 мм.	9015
Трегер из муллита, 55x55 мм.	9016
Штифты из оксида алюминия, 2 мм.	9020
Штифты из оксида алюминия, 3 мм.	9021
Штифты из оксида алюминия, 5 мм.	9022
Комплект штифтов из оксида алюминия, по 4 шт. каждого размера.	9029

ZIR.CARE


НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СПЕЧЕННЫХ АЛМАЗОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ

С первых минут при использовании ZIR.CARE у вас появится новое незнакомое вам чувство при шлифовании: эффективно, мягко и комфортно.

Новые параметры при обработке диоксида циркония. Инструменты ZIR.CARE отлично подходят также для шлифования спеченой керамики.

Инструменты ZIR.CARE изготовлены не обычными производителями, а разработаны особо и эксклюзивно вместе со Smile Line и для Smile Line.

- эффективное шлифование;
- мелкая зернистость;
- очень долговечны;
- применимы для оксида циркония и спеченой керамики.

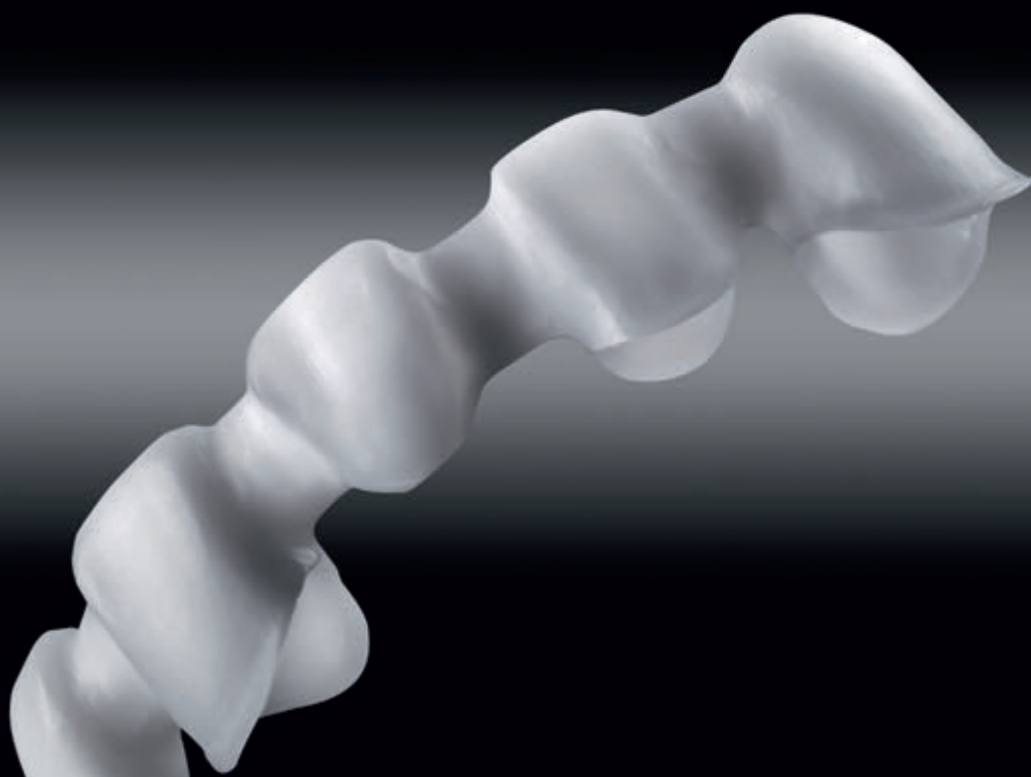

Колесо 20/4

44

45



Линза 20/2



Колесо 12/2

Наименование	Кат.номер.
Zir.Care, комплект, 3 формы спеченных алмазов, 1 камень для чистки.	ZC-00-assst
Zir.Care, спеченный алмаз, колесо 20x4 мм, 1 шт.	ZC-20W
Zir.Care, спеченный алмаз, линза 20x2 мм, 1 шт.	ZC-20L
Zir.Care, спеченный алмаз, колесо малое, 12x2 мм, 1 шт.	ZC-12WS
Zir.Care, камень для чистки, 1 шт.	ZC-cleaner

УМНЫЙ ПАУК

ПАЙКА ДО И ПОСЛЕ ОБЖИГА




«Паук» Smile Line для пайки перед обжигом и после него обеспечивает простые, надежные и быстрые рабочие процессы.

СВОЙСТВО АДАПТИРОВАТЬСЯ

Стержни паука изготовлены из огнеупорного стального сплава, они стабильны, закреплены по дуге и могут отгибаться в разные стороны, чтобы соответствовать индивидуальной пайке. Малый расход паковочной массы, малое поглощение тепла...

КРОМЕ ТОГО

За счет дизайна может также использоваться как трегер при обжиге металлокерамических и цельнокерамических коронок и мостовидных протезов.

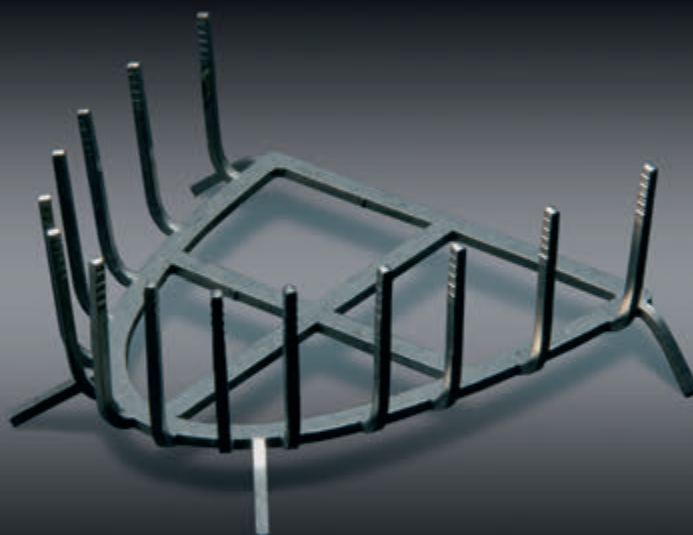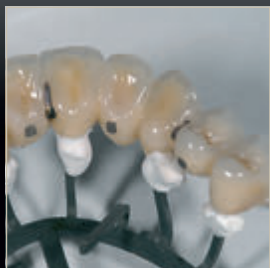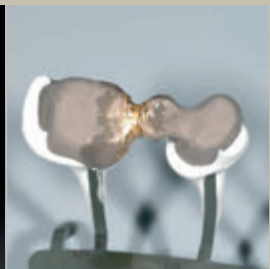

Наименование	Кат.номер
Паук для пайки (верхняя и нижняя челюсть), по 1 шт.	9060
Паук для пайки (верхняя челюсть), 1 шт.	9061
Паук для пайки (нижняя челюсть), 1 шт.	9062



THE CUBE

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНТЕЙНЕР С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

Алюминиевый контейнер очень компактен (150x150x150 мм). Первоначально предназначался для хранения восковых понтиков.

Но он идеально подходит для хранения и других предметов (отвертки, замки, имплантаты и т.д.). Поэтому CUBE предлагается также без понтиков.

Базисная версия включает шесть выдвижных ящиков с девятью отделениями в каждом. Предлагается также дополнительная конфигурация ящиков (см. схему внизу).

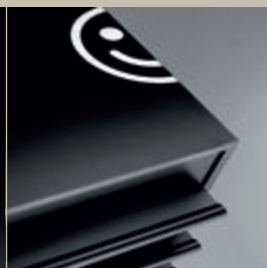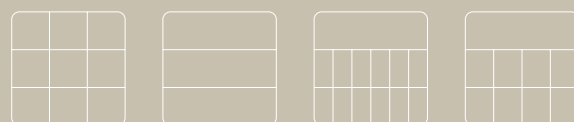



46

47

Наименование	Кат.номер.
CUBE, алюминиевый контейнер, анодированный, натуральный цвет (150x150x150 мм), 6 ящиков с 9 отделениями в каждом, пустой.	2299
CUBE, алюминиевый контейнер, анодированный, черный цвет.	2599-В
Ящик – вставка с тремя отделениями, 3 шт.	2591
Ящик – вставка с 12+1 отделениями, 3 шт.	2592
Ящик – вставка с 8+1 отделениями, 3 шт.	2593

ЦИРКУЛЬ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

КОМПАС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»

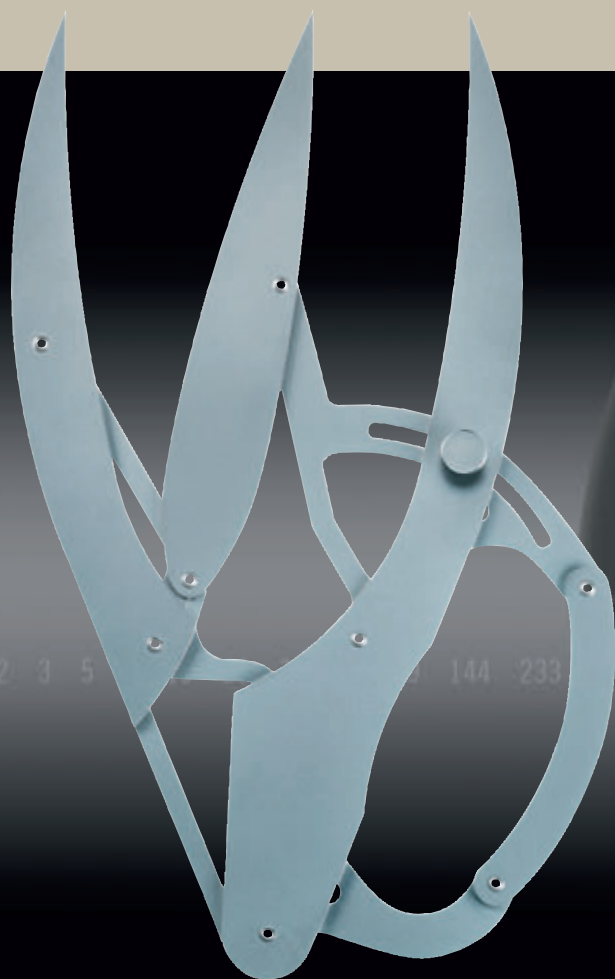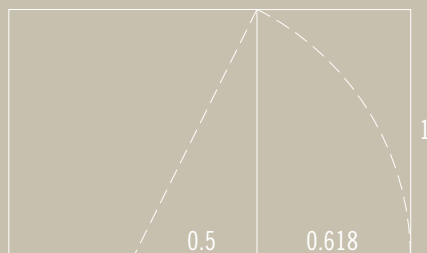

Наименование	Кат.номер.
Блоки с предварительно нанесенными делениями «золотое сечение», 7,0 мм, 6 шт.	6020-70
Блоки с предварительно нанесенными делениями «золотое сечение», 7,5 мм, 6 шт.	6020-75
Блоки с предварительно нанесенными делениями «золотое сечение», 8,0 мм, 6 шт.	6020-80
Блоки с предварительно нанесенными делениями «золотое сечение», 8,5 мм, 6 шт.	6020-85
Блоки с предварительно нанесенными делениями «золотое сечение», 9,0 мм, 6 шт.	6020-90
Блоки с предварительно нанесенными делениями «золотое сечение», 9,5 мм, 6 шт.	6020-95
Футляр с циркулем «Золотое сечение», включая 6 блоков с предварительно нанесенными делениями «золотое сечение», инструкция по применению	6010

КОНСТАНТА В УНИВЕРСУМЕ

Золотое Сечение (лат. Sectio aurea) – это соотношение двух чисел, примерно 1 : 1.618. В математической литературе Золотое Сечение обозначается как Пи (Phi). В искусстве и архитектуре Золотое Сечение определяется как идеальная пропорция различных длин. Оно считается символом эстетики и гармонии. Кроме того, соотношение Золотого Сечения наблюдается и в природе. Конечно, часто оно выбирается интуитивно, неосознанно, без точного контроля размеров. Другие используемые наименования – «постоянное деление» и «божественное деление».

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



Циркуль «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» помогает в кратчайшее время понять и использовать пропорции. Как слегка так и широко открытый циркуль ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ постоянно показывает два сегмента, которые определяют «золотое сечение». Он изготовлен из нержавеющей стали самого высокого качества и собран с величайшей тщательностью. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» поставляется в представительном футляре с детальной инструкцией по применению и комплектом очень полезных блоков с предварительно нанесенными делениями..

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ

Многие исследования доказывают, что золотые пропорции являются компонентом гармоничной улыбки в стоматологии (см. иллюстрации). За секунды вы определите теоретически идеальное соотношение относительно реальной ситуации в полости рта. Координаты являются ценной помощью в различных областях::

- Эстетические реставрации;
- Полное съемное протезирование;
- Позиционирование-наклон оси зуба;
- Гингивектомия;
- Контроль восковой модели.



$$\frac{A}{B} = \frac{B}{C}$$

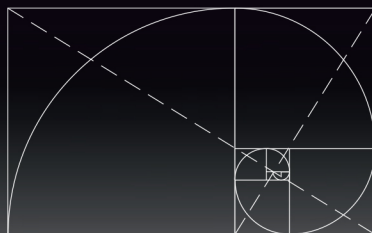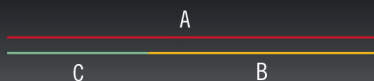

48

49

168 75025 121393 196418 317811 514229 832040 1346269 2178309 3524578 5702887 9227465 14930352 24157817

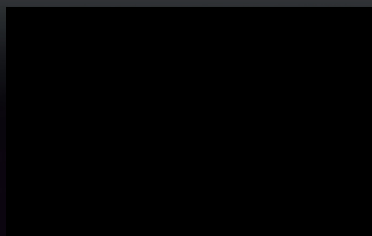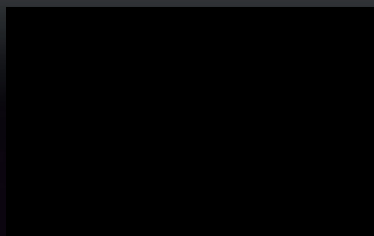

▲ Блоки с предварительно нанесенными делениями «золотого сечения» очень полезны при использовании в полости рта пациента, а также при работе с моделью.

N-ARCHITECT WAX-UP ASSISTANT ANTERIOR

ВОСКОВЫЕ ЗАГОТОВКИ - СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

Новая система восковых заготовок фронтальных зубов Architect Wax-Up Assistant ANTERIOR включает белые восковые заготовки из 100%ного биовоска. Они обеспечивают эффективность при изготовлении диагностических восковых моделей для работ на имплантатах, долговременных временных протезов или пресскерамики, что значительно превосходит по эффективности все обычные методы.

Набор включает три удивительно простых формы: треугольную, овальную, прямоугольную, а также универсальную форму фронтальных зубов нижней челюсти. Каждая форма представлена в двух размерах: малый, большой (S, L). Восковые формы легко и просто обрабатываются. Им легко можно придать форму, немного подогрев феном.

Каждый комплект включает моделировочный воск Smile Line (ADD-ON WAX) и воск для позиционирования (POSITION WAX). Качество и цвет моделировочного воска соответствуют показателям восков, из которых изготовлены фасетки.

СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ: если вы предпочитаете свой воск, вы можете без проблем заказать только комплект силиконовых форм – по 1 каждой формы зуба/размера, всего 8 форм.



Наименование	Кат.номер
New Architect Wax-up Assistant ANTERIOR, набор для фронта 72x4шт., 8 силиконовых форм, 4 модели-образца, воск для позиционирования и моделировочный воск, алюминиевый контейнер	2110-AA
New Architect, комплект силиконовых форм, 8 шт.	2111
New Architect, полиуретановые модели-образцы, 4 шт.	2112
Пополнение, 15 шт. одной формы/размера	N-Refill
New Architect, белый воск ADD-ON, 30 гр.	2150
New Architect, позиционный воск (POSITION), 30 гр.	2151



50

51

▲ Быстрая и простая установка фасеток Architect с помощью позиционного воска – затем изготовление восковой модели с использованием моделировочного воска. Для последующего наполнения используется воск ADD-ON.

▲ В работах с имплантатами использование восковых заготовок для диагностической восковой модели позволяет значительно экономить время.

▲ Долговременные временные протезы, изготовленные с помощью силиконового ключа с использованием восковой модели на основе Architect.

N-ARCHITECT WAX-UP ASSISTANT POSTERIOR

ОККЛЮЗИОННЫЕ ВОСКОВЫЕ ФАСЕТКИ

Новая система восковых фасеток боковых зубов Architect Wax-Up Assistant POSTERIOR изготовлена из белого воска. Они обеспечивают повышенную эффективность при многочисленных показаниях как:

пресскерамика, - всевозможные формы восковых моделей - реставрации на имплантатах - долговременные временные протезы и т.д.

К тому же они легко меняют форму при небольшом нагревании феном. С каждым набором фирма Smile Line поставляет пробную упаковку воска Architect ADD-ON и позиционного воска. Качество и цвет воска ADD-ON соответствуют показателю воска, используемого для заполнения форм.

Силиконовые формы поставляются также отдельно в виде набора из 4 форм. Необходимое вспомогательное средство в каждой дентальной лаборатории!



Наименование	Кат.номер
New Architect, набор силиконовых форм боковых зубов, 4 шт.	2121
New Architect Wax-up Assistant POSTERIOR, набор окклюзионных фасеток 32x10 шт., 4 силиконовых формы, воск для позиционирования и моделировочный воск, алюминиевый контейнер	2120-AP
Пополнение, 15 шт. одной формы/размера	N-Refill
New Architect, белый воск ADD-ON, 30 гр.	2150
New Architect, позиционный воск (POSITION), 30 гр.	2151



52

53

▲ Прессованная керамика на колпачке из оксида циркония. Разумеется, фасетки Architect и восковые жевательные поверхности применимы для традиционной пресс-керамики или техники «прессование-на-металл»

WAX PONTICS

ГОТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ВОСКА

КОНЦЕПЦИЯ

Комплект восковых понтиков Smile Line включает 54 различных формы и размера (малые/средние/большие).


Оптимальный дизайн для удобной работы при повседневном использовании.

ПРОСТО И КОМФОРТНО

Каждый промежуточный элемент имеет квадратный штифт длиной 10 мм. Это дает несколько преимуществ:

- **простое позиционирование промежуточных элементов;**
- **дополнительно выполняет функцию ребра для охлаждения;**
- **пин для мостовидных протезов, обжигаемых навису.**

Чтобы работать с этой продуманной системой, необходимо сделать выбор между полным комплектом «CUBE KIT» (эксклюзивный алюминиевый контейнер содержит 324 восковых понтика) или стартовым комплектом «STARTER KIT», содержащим 162 элемента.

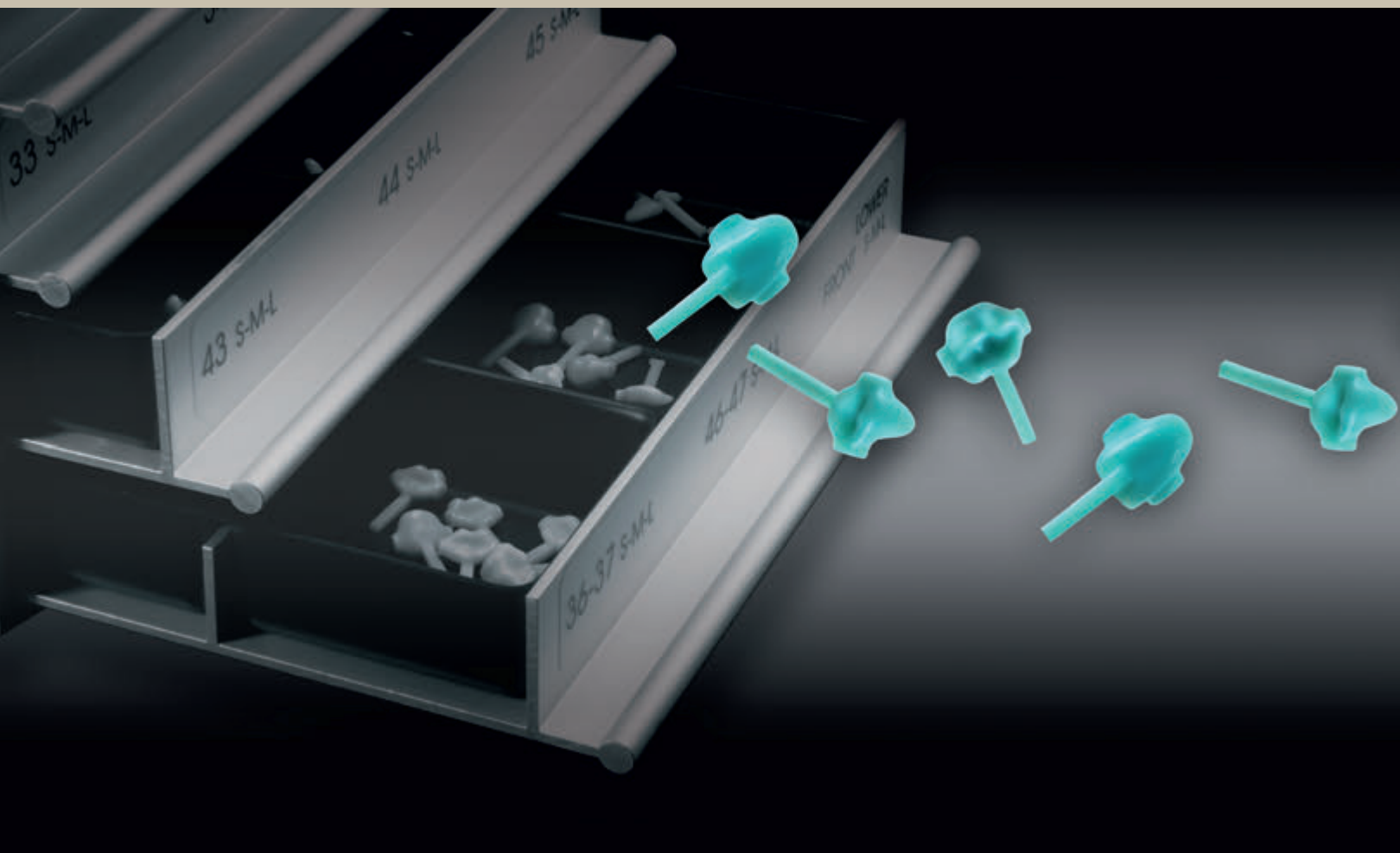

Наименование	Кат.номер
Понтики Smile Line, алюминиевый контейнер, полный комплект, 324 шт(54x6)	2510
Понтики Smile Line, стартовый комплект, 162 шт., (54x3)	2515
Пополнение комплекта, 20 шт. каждой формы и размера	Refill
Металлический пин для обжига*	9050
Подушка-подставка «Hold On», 2 шт.	1500
Комплект Mini Waxtic, вкл. 750 шт. Waxtic, металлический пин для обжига, сотовый трегер для обжига 45x45	2520
Mini Waxtic, восковые заготовки, 750 шт.	2525

* с каждым набором поставляется пин для обжига.



ПРИНЦИП... КВАДРАТНЫЕ...

Восковой штифт соответствует пину для обжига (включен в комплект), это позволяет производить обжиг мостовидных протезов «навису».

В мостовидные протезы из 6 – 8 элементов (сплав с высоким содержанием драгметаллов) могут обжигаться без деформации только с восковым штифтом.

MINI WAXTIC

Аналогично восковым понтикам MINI WAXTIC также имеет квадратный профиль. MINI WAXTIC – это восковой профиль, который крепится на модели. Отлитый однажды, MINI WAXTIC очень полезен и удобен в качестве держателя объекта. Используется с соответствующим металлическим пином. Обеспечивает надежность при каждом обжиге керамики вплоть до глазурования.

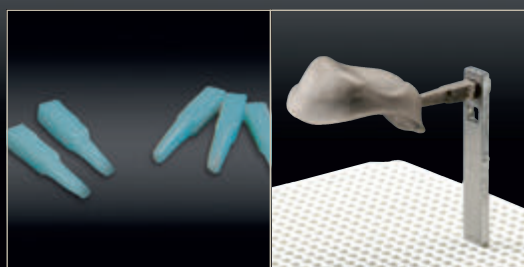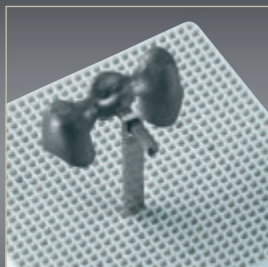

54

55

▲ Каждый раз, когда для работы необходимы обе руки... Подушка-подставка HOLD ON предназначена для оптимального позиционирования рабочей модели.

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ВОСКА

КАЧЕСТВО, ДОВЕРИЕ И РАБОЧИЙ КОМФОРТ

Реагируя на большой спрос, консультанты фирмы Smile Line выбрали три ведущих качественных воска.

Прецизионный плечевой воск

Это красный воск с превосходными свойствами для моделирования всех краевых зон (колпачки и инлеи). Этот воск практически не сжимается – он очень инертный.




Прецизионный воск для инлеев

Сохраняющий стабильную форму моделировочный воск зеленого цвета, применяется для жевательных поверхностей и инлеев. Он очень приятен в обработке. К тому же его высокое качество позволяет использовать его при фрезеровании. После процесса литья и прессования получается чрезвычайно гладкая поверхность.

Прецизионный моделировочный воск

Это универсальный твердый воск темно-зеленого цвета, применяется для моделирования колпачков и элементов каркасов. Он имеет очень маленькую усадку, выгорает без остатка и обеспечивает отличный комфорт в работе.

Все воска фирмы Smile Line на 100% органические.

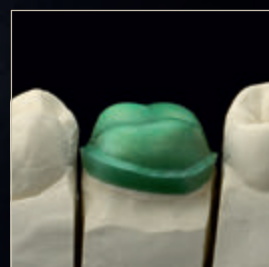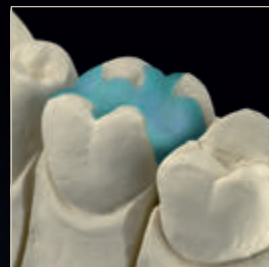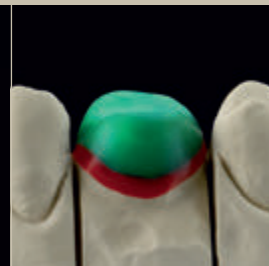

Наименование	Кат.номер
Воск ADD-ON, белый, 30 гр.	2150
Позиционный воск (POSITION), 30 гр.	2151
Плечевой прецизионный воск, красный, 30 гр	2160
Прецизионный воск для инлеев, светло-зеленый, 30 гр.	2161
Прецизионный моделировочный воск, темно-зеленый, 30 гр.	2162

HOLDING GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ

ПРОСТО



Нанесения маленькой капли на штампик достаточно для временной фиксации венира и цельнокерамической конструкции на модели. Гель для фиксации применим при шлифовании аппроксимальных контактов, а также при нанесении керамики и фиксации антагонистов.

Транспарентен, не влияет на цвет, растворяется в воде и сгорает без остатка.



56

57

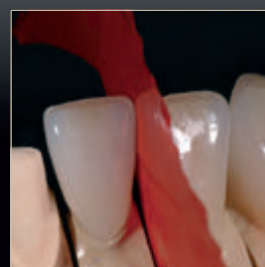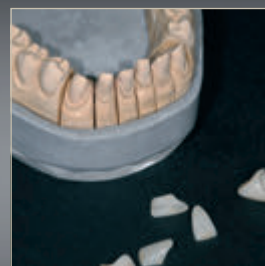

Наименование

Гель для фиксации, 6 мл.

Кат.номер.

5110

ПИЛОТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО

Ян Кех (керамист и владелец дентальной лаборатории в Туне, Швейцария) и Оливье Шерен (владелец фирмы Smile Line) встретились в Монтре на Женевском озере во время стоматологической выставки в конце 80-х, за несколько лет до рождения Smile Line.

В ходе обучения по повышению квалификации и организации мастер-классов это знакомство перешло в чудесную дружбу.

С момента создания Smile Line в 1994 году Ян постоянно консультировал нас и на многих этапах поддерживал своими блестящими идеями, будь-то подлинным интересом при обоснованиях или на всех фазах испытаний и приемки продукции. Его многосторонний талант, его знания и кругозор всегда были существенной помощью и имели важное значение.

Уже более 20 лет Ян и Оливье встречаются два-три раза в неделю для обмена идеями, обсуждения профессиональных и других тем, эти встречи заканчиваются чаще всего поздно и нередко бокалом хорошего красного вина, пиццей или Tagliata di Manzo. Без сомнения, крепкая дружба является основой этого великолепного контакта.

Ян в любой момент «авантюр» Smile Line находится на нашей стороне, за это мы хотели бы таким образом официально поблагодарить его.



ЗАО "ОМНИ МЕД" ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ

КАНАЛ НА YOUTUBE: ЗАО "ОМНИ МЕД"

Существующие темы вебинаров:

I. Клинические и экономические аспекты в выборе керамик и композитов.

Программа вебинара:

1. Выбор керамики (металлокерамика и безметалловая керамика);
2. Выбор типа керамик или композитов в зависимости от клинических случаев;
3. Экономическая составляющая при выборе керамик;
4. Правильный выбор формы зуба в зависимости от пропорции, типа лица и линии улыбки;
5. Создание модели, воскового ключа.

II. Металлокерамика. Оснащение рабочего места зубного техника.

Программа вебинара:

1. Инструменты, приспособления, печи для металлокерамик (проблемы и настройки);
2. Определение цвета зубов пациента;
3. Техника нанесения металлокерамики;
4. Использование красок и модификаторов для создания индивидуальных характеристик зубов;
5. Уплотнение керамики - мифы или реальность?

III. Воссоздание безметалловых конструкций на основе диоксида циркония.

Программа вебинара:

1. Правильный каркас — основа для идеального протезирования.
Оборудование, необходимое для создания каркасов на основе диоксида циркония
2. Обработка каркаса — требования к инструментам и полирам.
3. Может ли керамика из циркония заменить металлокерамику?
4. Керамика на основе диоксида циркония — основа для эстетических реставраций.
5. Отличия различных керамических систем. Преимущества полевешпатных керамик с лейцидной структурой.
6. Особенности техники нанесения и методик для безметалловых конструкций.
7. Краски, модификаторы для воспроизведения индивидуальных характеристик.
8. Моделировочные и вращающиеся инструменты для обработки циркония.

IV. Однослойная металлокерамика — достойная альтернатива в условиях кризиса.

Программа вебинара:

1. Однослойная керамика — мифы о недостатках. Первые однослойные керамики.
Какие ошибки были допущены производителями. Новое поколение однослойных металлокерамик.
2. Рекомендации по подготовке каркаса. Выбор сплавов.
3. Создание естественной металлокерамической реставрации с минимальными затратами времени и материала без потери качества.
4. Красители и модификаторы — различные методики для воспроизведения индивидуальных характеристик.
5. Моделировочные инструменты, боры и полиры. Правильный выбор инструментов для обработки в зависимости от материала.
6. Экономические аспекты при выборе однослойной керамики.

V. Применение композитных материалов в съемном и не съемном протезировании.


Программа вебинара:

1. Цветопередача композитных материалов.
2. Области применения композитов в ортопедии (съемное и несъемное протезирование).
3. Методы изготовления каркасов под нанесение композитных материалов.
4. Выбор конструкций с применением композита.

Обновление программ дальнейших вебинаров смотрите на нашем сайте www.shofu-meisinger.ru



Line

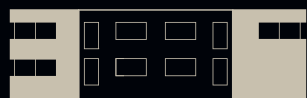

Smile Line – Switzerland

Smile Line Sàrl
ZI La Clef 5
PO Box 229
CH-2610 St-Imier · Switzerland
T +41 32 944 22 44
F +41 32 944 22 45
mail@smileline.ch
www.smileline.ch

ЗАО "Омни Мед"
Россия · Москва · 115114
ул. Дербеневская, д. 14/3

T/ F +7 495 255 16 13
многоканальный
karies013@mail.ru
www.shofu-meisinger.ru

Smile Line ☺
made in switzerland

