

# VITA SMART.FIRE®

Эффективная печь для работы в клинике



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 07.20



VITA – perfect match.

**VITA**

## Описание продукта

Специально для работы в клинике была разработана печь VITA SMART.FIRE. С ее помощью можно проводить кристаллизационный, глянцеобразующий и корректировочный обжиг, а также обжиг красителей для всех стандартных Chairside-материалов. Выбор материала

и пуск программы осуществляется за один шаг. А предустановленные программы, идеально согласованные с материалами, упростят проведение обжига. Благодаря компактному дизайну печь легко найдет свое место в любой клинике.

## VITA SMART.FIRE® SYSTEM – ДЛЯ ВСЕХ ПОКАЗАНИЙ



Интегрированный набор принадлежностей

Chairside-печь

Пульт управления

### Что?

- Специально для работы в клинике была разработана печь VITA SMART.FIRE. С ее помощью можно проводить кристаллизационный, глянцеобразующий и корректировочный обжиг, а также обжиг красителей для всех стандартных Chairside-материалов.

### Для чего?

- Печь управляется посредством сенсорного пульта управления. А предустановленные программы, идеально согласованные с материалами, упростят проведение обжига.

### С помощью чего?

- VITA SMART.FIRE SYSTEM включает печь, пульт управления, а также интегрированный набор инструментов

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### **TOUCH & FIRE!**

*Выбрать и сразу запустить программу обжига - готово!*

**1. Интуитивное управление**

**2. Удобное использование**

**3. Надежная функциональность**

**TOUCH  
&  
FIRE**

#### **Интуитивность**

- Интуитивное управление благодаря выбору материала и пуску программы в один шаг
- Меню с самообъясняющими символами для быстрого выбора программы

#### **Удобство**

- Предварительно установленные программы для всех стандартных врачебных материалов
- Простое и легкое применение благодаря компактному дизайну

#### **Надежность**

- Надежная работа благодаря долговечности конструкции
- Прочный герметичный корпус



## КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE®

Пульт управления



Пульт управления VITA SMART.FIRE®


### Что?

- Пульт управления с предустановленными программами для всех стандартных Chairside-материалов
- 10-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением для наилучшего качества изображения
- Интуитивная концепция управления для выбора материала и пуска программы в один шаг
- Меню с самообъясняющимися символами для быстрого выбора программы
- Функция ассистента для поэтапного обжига

### Для чего?

- Для интуитивно понятного, простого обжига

## КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE® Принадлежности

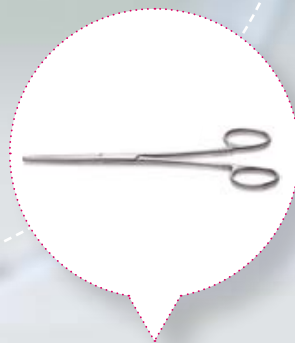

### Принадлежности VITA SMART.FIRE®


#### Что?

- Интегрированный набор инструментов для комфортного обжига
- В набор входят: обжигový трегер, ватный обжигový трегер, платиновые штифты, печные щипцы и столик для охлаждения

#### Для чего?

- Таким образом все необходимое находится всегда под рукой


## Обзор продуктов и систем

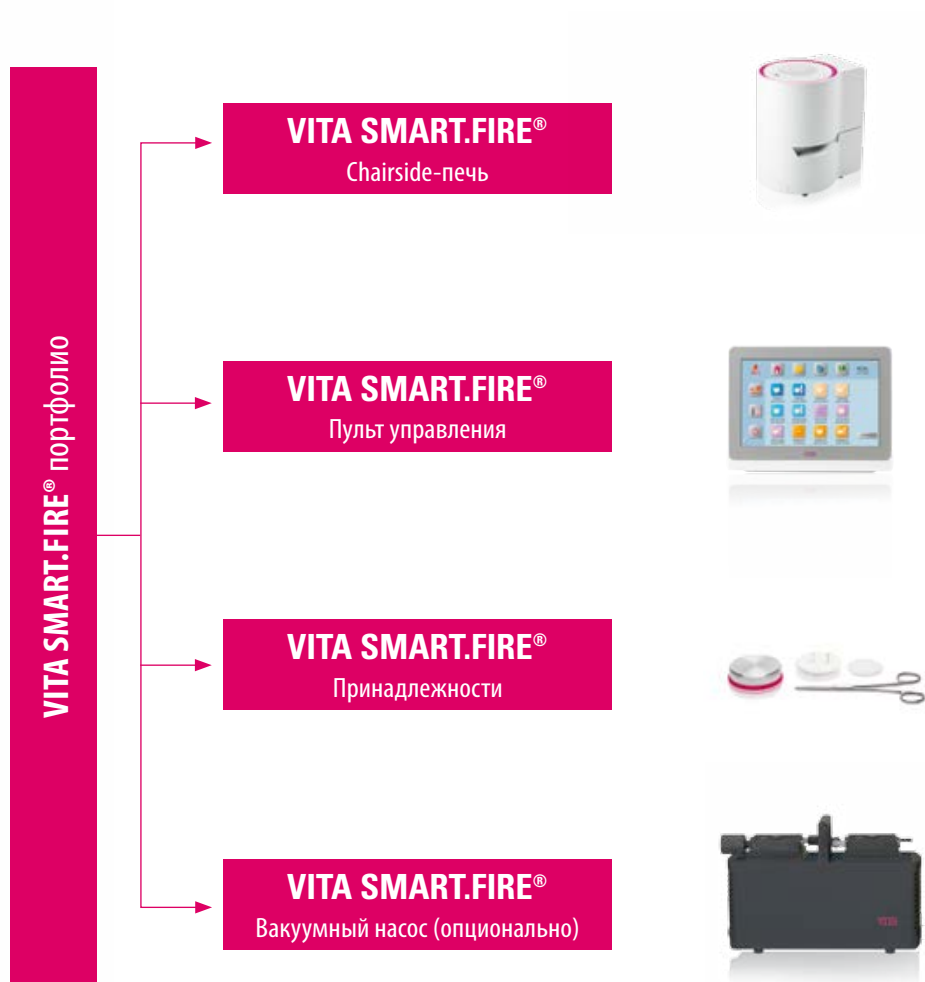

### VITA SMART.FIRE®

Наименование	Размеры	Технические характеристики	Объем поставки	Кат. №
Chairside-печь	Корпус Ø 230 мм Т: 300 мм Н: 340 мм Камеры обжига Ø 80 мм Н: 43 мм	<b>Электрическое подключение:</b> 230 Вольт AC, 50 Гц или 100/110 Вольт AC, 50/60Гц <b>Мощность:</b> 950 Вт <b>Температура камеры обжига:</b> 1050 C	1x печь 1x набор принадлежностей 1x инструкция	<b>DSF220</b> (230V-Version)  <b>DSF100</b> (100V-Version)  <b>DSF110</b> (110V-Version)
Пульт управления	Ш: 260 мм Г: 150 мм В: 200 мм	TFT-Touch-дисплей 10 дюймов, 1280 x 800 USB-/SD-интерфейс	1 x электрический сетевой кабель	
Принадлежности	—	—	2x платиновые штифты 1x ватный обжигый трегер 1x обжигый трегер 1x печные щипцы 1 x столик для охлаждения	
Вакуумный насос (опционально)	—	—	1x вакуумный насос 1x вакуумный шланг	<b>DVPU220</b>

Более подробную информацию о VITA SMART.FIRE Вы можете найти на сайте: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

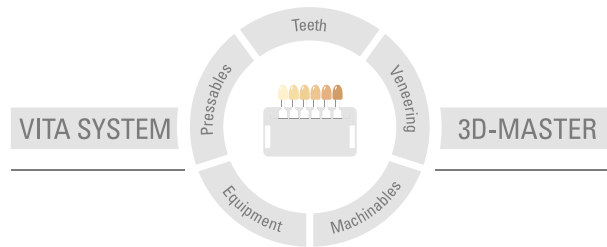

**Внимание:** Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 07.20

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA SMART.FIRE® ist CE отмечен знаком CE в соответствии с директивой EG 2006/95/EG, 2004/108/EG и 2011/65/EG.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)